


elite glass

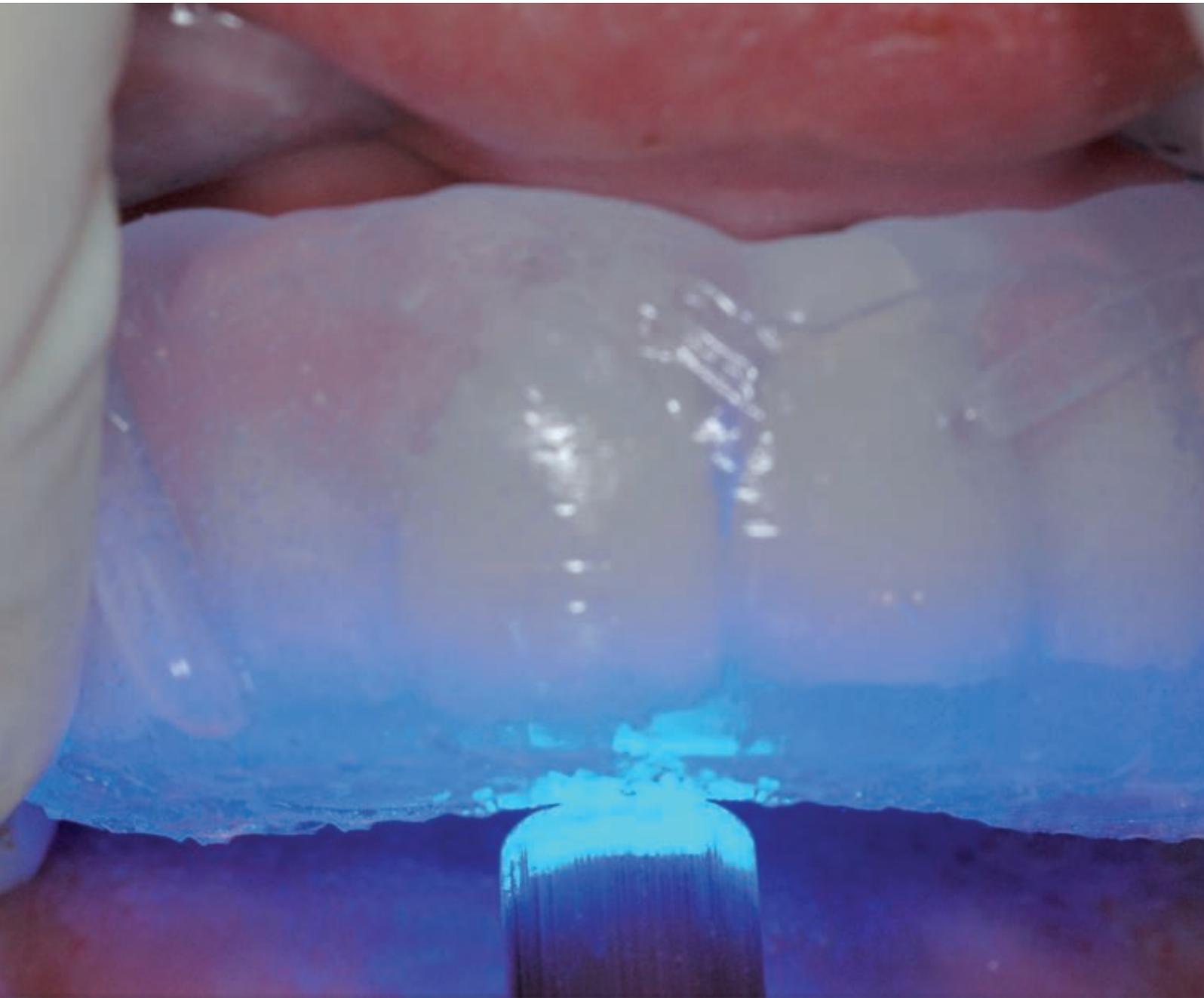

Clinical

A-Silicone Clear Matrix Material

Zhermack 
Dental



elite glass

La transparence du détail

ELITE GLASS est le nouveau silicone par addition de **ZHERMACK** présenté en cartouche de 50 ml. Il permet la réalisation de matrices extrêmement transparentes utilisées pour la résolution directe de **restaurations esthétiques**.

EMPLOI UNIVERSEL

ELITE GLASS peut être utilisé en **différentes situations cliniques**, par élaboration directe de la matrice dans la bouche du patient (ex. pigmentations) ou, indirectement, à partir d'un modèle (ex. résolution de diastèmes, correction de rotations, fractures, anomalies dentaires, appareils provisoires).

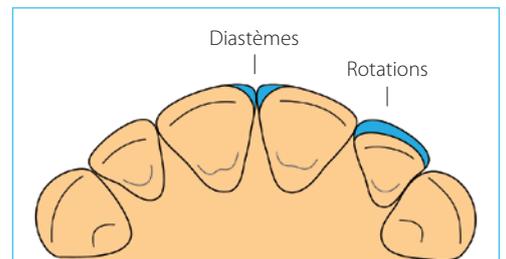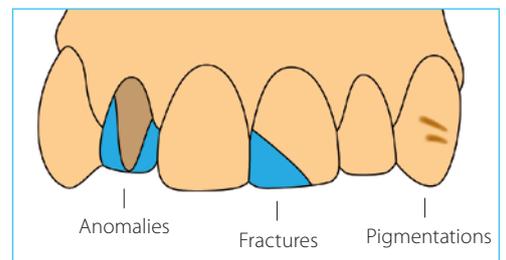

TRANSPARENCE EXTRÊME

La nouvelle formule mise au point pour **ELITE GLASS** confère à la matrice une **transparence extrême** qui garantit une **photopolymérisation parfaite** du composite utilisé pour la restauration.

RIGIDITÉ PARFAITE

La rigidité parfaite des matrices obtenues avec **ELITE GLASS** permet de conserver **leur forme originale** et simplifie le repositionnement **sans déformation**.

RÉSULTATS ESTHÉTIQUES DE QUALITÉ

Les matrices obtenues avec **ELITE GLASS** permettent d'obtenir des **résultats esthétiques optimaux** et **rapides** en simplifiant les procédures cliniques.

CAS CLINIQUE DIRECT



Cas initial



Création de la matrice avec ELITE GLASS : laisser 2 mm de silicone autour les dents*



Contrôler que la zone de l'empreinte est exempte de défauts



Préparation de la facette



Conditionnement de la surface**



Application du composite à partir de la zone incisale vers le bord cervical



Repositionnement de la matrice réalisée avec ELITE GLASS en ayant soin de ne laisser aucun espace entre la matrice et les dents. Photopolymériser à travers la matrice**



Finition du composite : éliminer l'excès de matériau et polir**



Résultat final

*Important : ne pas oublier de niveler le matériau, du moins lors de la première utilisation
**Se conformer aux instructions du fabricant du composite

INFORMATIONS TECHNIQUES

Temps de travail	40"
Temps de séjour dans la cavité orale	1'30"
Temps de prise	2'10"

Le temps d'utilisation démarre à partir du début du mélange à 23°C - 73°F, le temps de séjour en bouche est prévu à 35°C - 95°F.

elite glass



Conditionnements

C401610 ELITE GLASS

2 cartouches (Base+Catalyseur) de 50 ml + 6 embouts de mélangeage verts

Accessoires

C202080 MIXING TIPS MEDIUM/GREEN

Embouts de mélangeage verts (48 pièces)

C202100 DISPENSER D2

Pistolet distributeur D2 - 1:1

BRANCHES

GERMANY

Zhermack GmbH Deutschland

Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND

Zhermapol Sp. z o.o.

ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
+48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA

Zhermack Inc.

P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com