

# acrytemp



AS SIMPLE AS A SMILE

Solution pour des provisoires de brève et longue durée

**Zhermack**   
Dental

Acrytemp,  
as simple as a smile.




## Pour la préparation de provisoires esthétiques et résistants, avec un excellent confort masticator.

La prothèse provisoire a une double mission, fonctionnelle et esthétique, mais elle est aussi celle qui interagit la première avec le patient, avant la définitive.

Pour cette raison, il est important de la réaliser de la meilleure des manières. Avec des matériaux présentant d'excellentes qualités de résistance, facilement modifiables durant toute la durée du traitement, et peu onéreux.

**Acrytemp - résine bisacrylique autopolymérisable** à base d'esters méthacryliques multifonctionnels, idéale pour la **réalisation de provisoires de brève et longue durée** - est la solution Zhermack qui satisfait tous ces besoins.

Redonner le sourire au patient et donner le sourire au praticien.

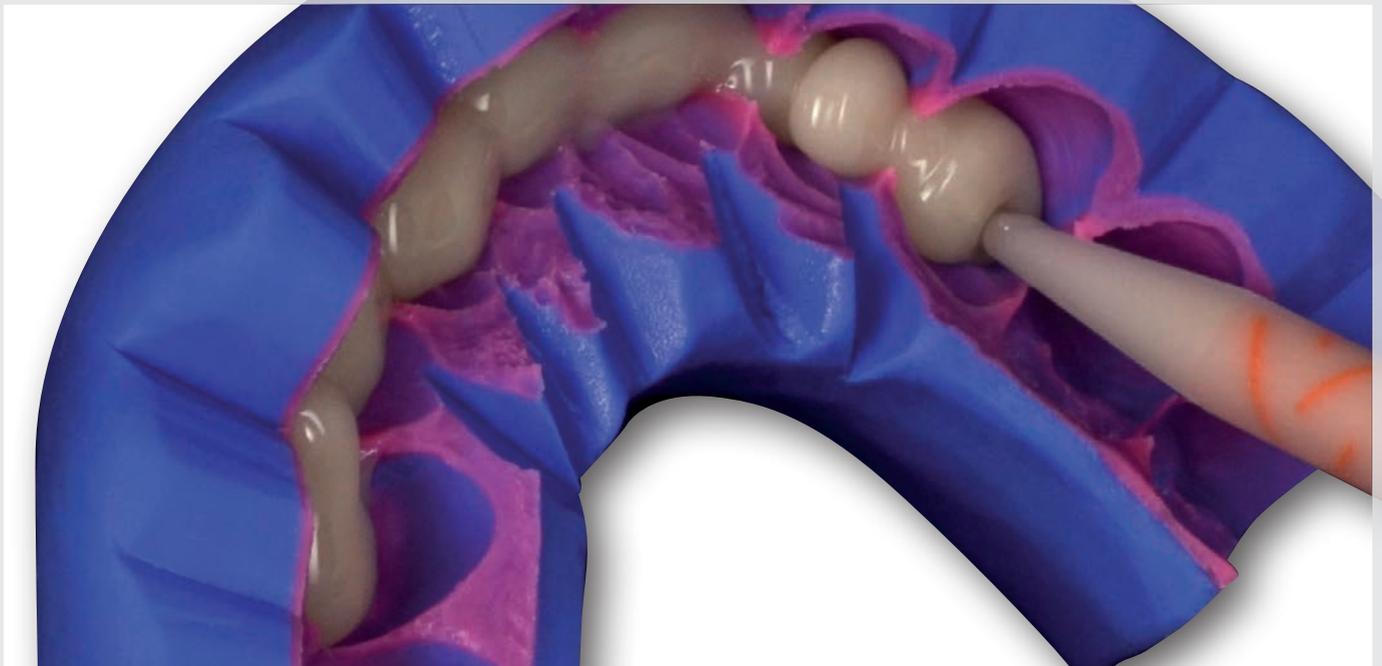

# Simple et efficace

## Facilité d'utilisation, sécurité, fiabilité, esthétique.

### Quatre avantages concrets, pour vous apporter entière satisfaction.

Quand facilité rime avec praticité, grâce à la compatibilité des cartouches Acrytemp avec les distributeurs 4:1/10:1 les plus diffusés.

Quand fiabilité rime avec adapté. Pour des bridges de grande portée.

Quand sécurité rime avec respect. Respect des tissus grâce au très faible dégagement de chaleur lors de la polymérisation et à l'absence de méthylméthacrylate réduisant grandement les risques d'irritation.

Quand esthétique rime avec mimétique. Grâce à une fluorescence très similaire à celle de la dent naturelle.



### Acrytemp se caractérise par :

- ▶ Sa résistance élevée à la rupture
- ▶ L'absence de méthylméthacrylate
- ▶ La faible augmentation de température durant la phase de polymérisation
- ▶ Une fluorescence similaire à celle des dents naturelles
- ▶ Facilité de rebasage
- ▶ Facilité de finition et polissage
- ▶ Système d'auto-mélange en cartouche 4:1
- ▶ Disponibilité en 5 couleurs : A1 - A2 - A3 - A3,5 - B1
- ▶ Précision élevée

# Techniques de préparation

**Acrytemp** est utilisable avec différentes techniques de fabrication, directes ou indirectes, et garantit au patient un bon confort masticaire ainsi qu'une esthétique et une fluorescence très similaires à celles de la dent naturelle.



## TECHNIQUE DIRECTE

- ▶ Réalisable directement au cabinet par le dentiste.
- ▶ Pour obtenir rapidement des provisoires esthétiques et résistants.



## TECHNIQUE INDIRECTE

- ▶ Enregistrement de l'empreinte par le praticien puis envoi au laboratoire
- ▶ Réalisation du provisoire au laboratoire en fonction de la prescription fournie.



## RÉALISATION DU MOCK-UP

- ▶ Lors du premier rendez-vous, le dentiste enregistre les empreintes du patient et l'occlusion.
- ▶ Même en présence de contre-dépouilles réduites, l'ensemble réalisé offre une insertion facilitée.

# Caractéristiques techniques



| Produit  | Temps du traitement (min:s) | Phase élastique, temps à partir du début de l'application (min:s) | Temps de prise (min:s)            | Résistance à la compression (au bout de 24 heures) | Résistance à la flexion (au bout de 24 heures) |
|----------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| Acrytemp | 0:50                        | 1:00 - 2:00 (35 °C)<br>3:00 - 4:00 (23 °C)                        | 4:30 (45 - 55 °C)<br>6:00 (23 °C) | 250 MPa  | 65 MPa   |

## Acrytemp - Résines pour restaurations provisoires

| Code    | Couleur | Conditionnement  |
|---------|---------|--|
| C700201 | A1      | Standard Pack: 1 cartouche de 50 ml (76 g) + 15 embouts de mélange 4:1 |
| C700200 | A2      | Standard Pack: 1 cartouche de 50 ml (76 g) + 15 embouts de mélange 4:1 |
| C700215 | A3      | Standard Pack: 1 cartouche de 50 ml (76 g) + 15 embouts de mélange 4:1 |
| C700205 | A3,5    | Standard Pack: 1 cartouche de 50 ml (76 g) + 15 embouts de mélange 4:1 |
| C700211 | B1      | Standard Pack: 1 cartouche de 50 ml (76 g) + 15 embouts de mélange 4:1 |



## Accessoires

Cod. C700230




D2 - 4:1/10:1 dispenser

Cod. C700240



Embouts de mélange 4:1 (45 pcs)

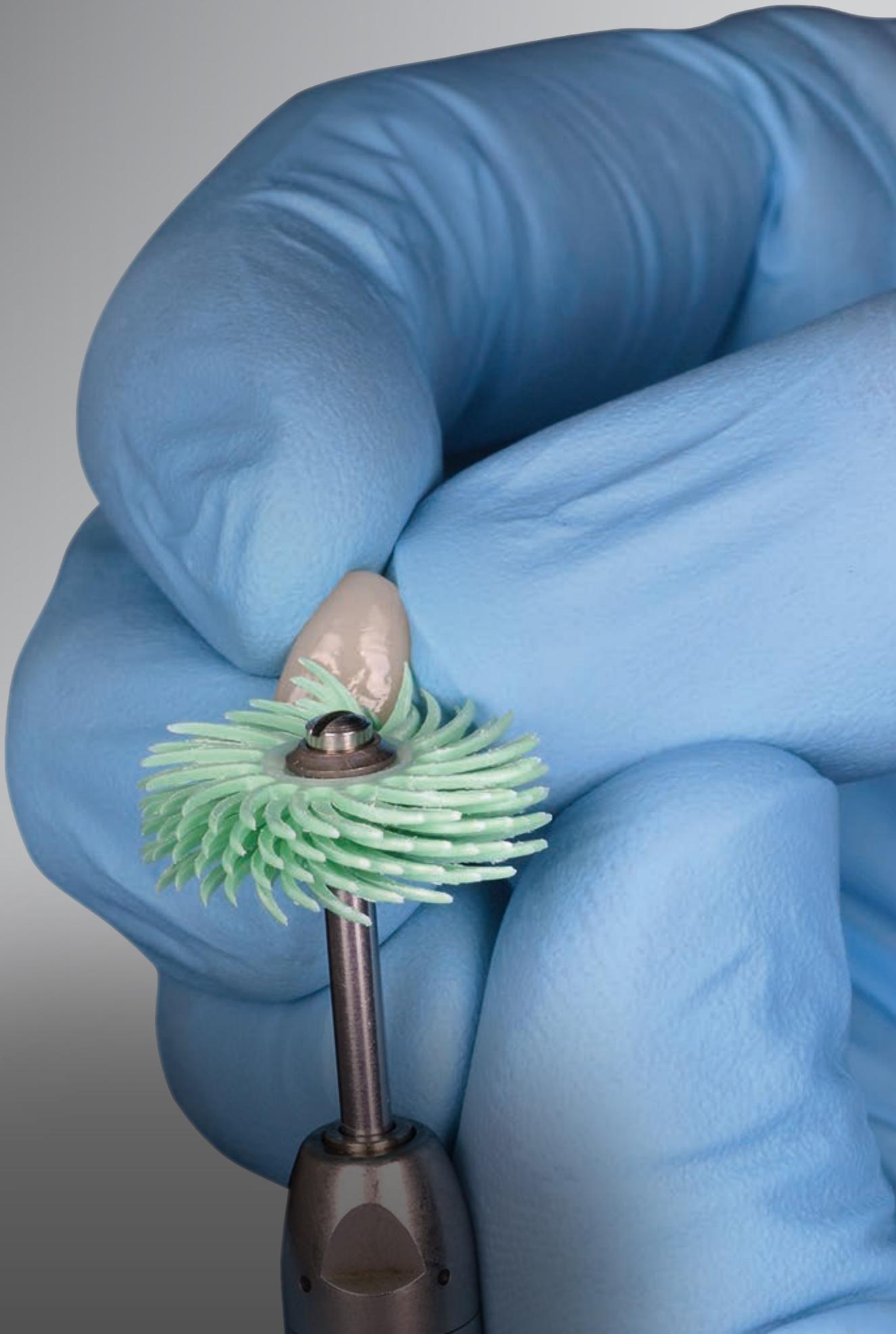

# Fulfilling your needs