



Protocolli di disinfezione e pulizia

CON COSA	DOVE	QUANDO	COME	SPETTRO D'AZIONE	
<div> Zeta 1 Ultra</div>	Disinfezione e deterzione di strumenti ordinari, chirurgici e frese	Dopo ogni possibile contaminazione.	<p>DILUIZIONE 2%</p> <p>Disinfezione ampia Preparare la soluzione: dosare 20 ml per ogni litro di soluzione. Disinfettare: immergere gli strumenti nel bagno statico per 60 minuti o nella vaschetta ultrasuoni per 30 minuti a 35° C.</p> <p>Disinfezione rapida, con spettro d'azione limitato Preparare la soluzione: dosare 20 ml per ogni litro di soluzione. Disinfettare: immergere gli strumenti nel bagno statico per 30 minuti.</p> <p>Al termine del tempo d'azione, strofinare gli strumenti utilizzando spazzole con setole in plastica morbida mantenendo gli strumenti completamente immersi nella soluzione. Rimuovere gli strumenti dal bagno di diluizione e risciacquarli accuratamente.</p>	<p>DILUIZIONE 2% (DISINFEZIONE AMPIA) BAGNO STATICO: Battericida: EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) Lievitica: EN 13624, EN 14562 (C. albicans) Battericida, lieviticida (15'): VAH Micobattericida, incluso tubercolicida: EN 14348, EN 14563 (M. terrae, M. avium) Virucida: EN 14476 (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, inclusi HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes simplex e tutti i virus influenzali umani e animali) BAGNO ULTRASUONI: Battericida, lieviticida, fungicida (A. brasiliensis), micobattericida incl. tubercolicida, virucida <i>Test effettuati in condizioni di sporco.</i></p> <p>DILUIZIONE 2% (DISINFEZIONE RAPIDA) BAGNO STATICO: Battericida: EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) Lievitica: EN 13624, EN 14562 (C. albicans) Limitatamente virucida: HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes simplex e tutti i virus influenzali umani e animali (D/W/RKI, prEN 16777) Micobattericida incl. Tubercolicida (60'): VAH <i>Test effettuati in condizioni di sporco.</i></p>	
<div> Zeta 2 Sporex</div>	Sterilizzazione chimica a freddo di strumenti ordinari, chirurgici e frese	Dopo ogni possibile contaminazione, dopo la fase di disinfezione.	<p>Preparare la soluzione: dosare 20 g (3 misurini) per ogni litro d'acqua. Attendere 15 min. Sterilizzare: immergere gli strumenti nella soluzione ottenuta per 10 min. Sciacquare accuratamente e asciugare. La soluzione preparata rimane stabile per 24 ore ma si consiglia di rinnovarla all'inizio di ogni giorno lavorativo.</p>	<p>Battericida: EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) Lievitica: EN 13624, EN 14562 (C. albicans) Micobattericida, incluso tubercolicida: EN 14348, EN 14563 (M. terrae, M. avium) Virucida: EN 14476 (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, inclusi HIV, HBV, HCV) Sporicida: EN 13704 (B. subtilis) <i>Test effettuati in condizioni di sporco.</i></p>	
<div> Zeta 3 Soft</div>	Disinfezione e deterzione di superfici di dispositivi medici non invasivi	Dopo ogni possibile contaminazione. Quando richiesto.	<p>Spruzzare il prodotto su una salvietta monouso fino a bagnarla completamente. Strofinare le superfici e aree da pulire fino alla completa rimozione di tutti i residui visibili. Ripetere l'operazione, spruzzando Zeta 3 Soft su una nuova salvietta monouso fino a bagnarla completamente e strofinare le superfici da disinfettare già precedentemente pulite, fino a quando non sono completamente bagnate. Attendere il tempo d'azione di 5 minuti.</p>	<p>Battericida*: EN 13727, EN 16615 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) Lievitica: EN 13624, EN 16615 (C. albicans) Tubercolicida: EN 14348 (M. terrae) Limitatamente Virucida: EN 14476 (Norovirus, Rotavirus, Adenovirus e tutti i virus incapsulati, inclusi HIV, HBV e HCV) <i>Test effettuati in condizioni di sporco.</i> <i>*Battericida secondo EN 16615 in 5 minuti in condizioni di pulito e in 10 minuti in condizioni di sporco.</i></p>	
<div> Zeta 3 Wipes TOTAL*</div>	Disinfezione e deterzione di superfici di dispositivi medici	Dopo ogni possibile contaminazione. Quando richiesto.	<p>Strofinare accuratamente la superficie con la salvietta assicurandosi che tutta la superficie da disinfettare sia coperta*. Lasciar asciugare.</p> <p><i>*Prima dell'applicazione verificare la compatibilità del prodotto contenente alcol su una parte nascosta della superficie da trattare. Non trattare aree delicate o sensibili all'alcol.</i></p>	<p>Battericida: EN 13727, EN 17387, EN 13697*, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) Lievitica: EN 13624, EN 17387, EN 13697, EN 14562 (C. albicans) Tubercolicida: EN 14348, EN 14563 (M. terrae) Virucida vs. virus incapsulati: EN 14476, EN 16777 (inclusi HIV, HBV, HCV) <i>Test effettuati in condizioni di sporco. * Test effettuato su S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E.coli.</i> Standards applicati alla soluzione. Efficacia delle salviette (Secondo il metodo prEN 16615, 10' contatto): R>4Log vs. S. aureus, E. hirae R>3Log vs. C. albicans, P. aeruginosa</p>	
<div> Zeta 3 Foam</div>	Disinfezione e deterzione di superfici delicate di dispositivi medici non invasivi	Dopo ogni possibile contaminazione. Quando richiesto.	<p>Spruzzare Zeta 3 Foam su una salvietta monouso fino a bagnarla completamente o in alternativa spruzzare direttamente sull'area da trattare. Strofinare con la salvietta monouso le superfici e le aree da pulire e disinfettare fino a quando non sono completamente bagnate. Attendere il tempo d'azione di 5 minuti.</p>	<p>Battericida: EN 13727, EN 16615 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) Lievitica: EN 13624, EN 16615 (C. albicans) Limitatamente virucida: EN 14476 (Adenovirus, Rotavirus, Norovirus e tutti i virus incapsulati inclusi HIV, HBV, HCV) <i>Test effettuati in condizioni di sporco.</i></p>	
<div> Zeta 3 Wipes POP-UP*</div>	Disinfezione e deterzione di superfici delicate di dispositivi medici non invasivi	Dopo ogni possibile contaminazione. Quando richiesto.	<p>Strofinare accuratamente la superficie con la salvietta assicurandosi che tutta la superficie da disinfettare sia coperta*.</p> <p><i>*Prima dell'applicazione verificare la compatibilità del prodotto su una parte nascosta della superficie da trattare.</i></p>	<p>Battericida: EN 13727*, EN 13697, EN 1276, EN 14561*, EN 14561 (MRSA) Fungicida: EN 14562 (A. fumigatus) Lievitica: EN 1650*, EN 13624, EN 13697, EN 14562 (C. albicans) Tubercolicida: EN 14348, EN 14563 (M. terrae) Virucida: EN 14476* (HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS, H1N1, H5V1), EN 14476 (Polyomavirus). EN 14476 (Rotavirus) <i>Test effettuati in condizioni di pulito. * Test effettuati in condizioni di sporco.</i></p>	
<div> Zeta 4 Wash</div>	Deterzione di superfici lavabili	Al termine della giornata lavorativa.	<p>Preparare la soluzione: diluire 1-2 tappi dosatori per ogni litro d'acqua. Lavare il pavimento in modo tradizionale. Per lo sporco ostinato applicare alcune gocce di prodotto su un panno umido e strofinare prima del lavaggio.</p>	Detergente	
<div> Zeta 5 Power Act</div>	Disinfezione e deterzione dei circuiti di aspirazione	Al termine di ogni giornata lavorativa e dopo ogni intervento chirurgico invasivo.	<p>Sciacquare il sistema di aspirazione aspirando 2 litri di acqua fredda. Preparare la soluzione: riempire un secchio con acqua e dosare 10 ml per litro d'acqua. Quindi mescolare la soluzione ottenuta. Disinfettare il circuito di aspirazione: aspirare la soluzione disinfettante, alternandola con aria nei tubi. Per una disinfezione rapida, lasciar agire per 15 minuti (esclusa azione tubercolicida). Per un'azione completa, lasciar agire per tutta la notte. Versare la rimanente soluzione disinfettante (almeno 250 – 300 ml) nella sputacchiera. Sciacquare nuovamente il sistema di aspirazione aspirando 2 litri d'acqua fredda.</p>	<p>Battericida: EN13727, EN14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) Lievitica: EN13624, EN14562 (C. albicans) Tubercolicida: EN14348 (M. terrae) Limitatamente virucida: prEN 16777, DVW/RKI vs. virus incapsulati e lipofili, inclusi virus ematici (HIV, HBV, HCV), Herpes simplex e famiglie di virus come orthomyxoviridae (inclusi tutti i virus influenzali umani e animali come H5N1 e H1N1), filoviridae (virus dell'ebola) e paramyxoviridae (virus del morbillo) Battericida, lieviticida: VAH <i>Test effettuati in condizioni di sporco.</i></p>	
<div> Zeta 7 Solution</div>	Disinfezione delle impronte dentali	Subito dopo la presa d'impronta prima del trasporto al laboratorio. Dopo la ricezione dal laboratorio.	<p>Sciacquare accuratamente l'impronta sotto acqua corrente. Preparare la soluzione: dosare 10 ml per litro d'acqua. Disinfettare: immergere l'impronta nella soluzione ottenuta per 10 minuti. Al termine del tempo d'azione, rimuovere l'impronta dal bagno di diluizione e risciacquarla accuratamente.</p>	<p>Battericida: EN 13727 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) Lievitica: EN 13624 (C. albicans) Battericida, Lievitica: VAH Tubercolicida: EN 14348, EN 14563 (M. terrae) Virucida vs. virus incapsulati: EN 14476 (Vaccinia Virus inclusi HIV, HBV, HCV) <i>Test effettuati in condizioni di sporco.</i></p>	
<div> Zeta 7 Spray</div>	Disinfezione delle impronte dentali	Subito dopo la presa d'impronta prima del trasporto al laboratorio. Dopo la ricezione dal laboratorio.	<p>Sciacquare accuratamente l'impronta sotto acqua corrente. Disinfettare: Inserire l'impronta risciacquata dentro un sacchetto e dopo aver inserito l'ugello del flacone all'interno dello stesso sacchetto, spruzzare Zeta 7 Spray 10 volte in modo da coprire l'intera superficie dell'impronta e del portaimpronte. Lasciare l'impronta dentale nel sacchetto trasparente per 5 minuti di contatto. Quindi, rimuoverla dal sacchetto e risciacquarla e/o asciugarla, secondo le istruzioni del produttore del materiale per impronte dentali.</p>	<p>Battericida: EN 13727, EN 17387 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) Lievitica: EN 13624, EN 17387 (C. albicans) Micobattericida incl. tubercolicida: EN 14348 (M. terrae, M. avium) Virucida: EN 14476, EN 16777 (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Rotavirus, inclusi HIV, HBV, HCV) <i>Test effettuati in condizioni di pulito.</i></p>	
<div> Zeta 6 Hydra</div>	Deterzione delle mani	Prima e dopo ogni trattamento. Dopo ogni contaminazione. In aggiunta se richiesto.	Bagnare le mani e versare il prodotto nel palmo, frizionare accuratamente le mani, quindi sciacquare ed asciugare.	Detergente liquido per l'utilizzo frequente su mani, contenente sostanze nutritive (Proteina del riso idrolizzata), protettive (Gliceril Oleato) e idratanti (Glicerina). Formulato appositamente per pelli delicate.	

* I prodotti Zeta 3 Wipes TOTAL e Zeta 3 Wipes POP-UP sono momentaneamente indisponibili.



STRUMENTI

DISINFEZIONE

Zeta 1 Ultra Concentrato 2%



PULIZIA



STERILIZZAZIONE CHIMICA A FREDDO

Zeta 2 Sporex Concentrato 2%



SUPERFICI DI DISPOSITIVI MEDICI

SUPERFICI RESISTENTI ALL'ALCOL

Zeta 3 Soft



Zeta 3 Wipes TOTAL*



SUPERFICI DELICATE

Zeta 3 Foam



Zeta 3 Wipes POP-UP*



*efficacia tubercolicida in 15 minuti



SUPERFICI


SUPERFICI LAVABILI

Zeta 4 Wash



CIRCUITI DI ASPIRAZIONE

Zeta 5 Power Act Concentrato 1%

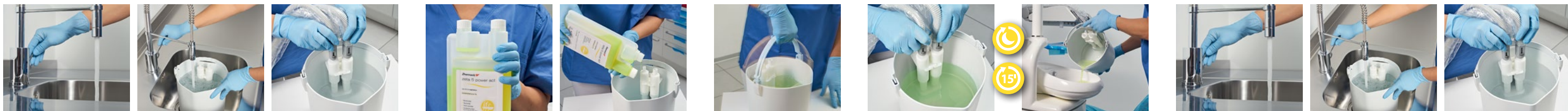

Tempo d'azione: tutta la notte per un'azione completa oppure 15 minuti per una disinfezione rapida (esclusa azione tubercolicida)



IMPRONTE

Zeta 7 Solution Concentrato 1%



Zeta 7 Spray



MANI

Zeta 6 Hydra

