GINGIFAST



GUIDA DI UTILIZZO

Silicone per addizione per la riproduzione gengivale



Gingifast, aesthetics & performing versatility



Gingifast è la linea di siliconi per addizione per la riproduzione della morfologia gengivale su modelli in protesi fissa e implantare.

Gingifast Elastic assicura elevati risultati estetici grazie alla sua traslucenza e alla presenza di vascolarizzazioni.

Gingifast Rigid è indicato per la tecnica diretta. Grazie alla sua durezza equilibrata, è facilmente lavorabile e rappresenta un prodotto di punta nel campo dell'implantoprotesi. **Gingifast CAD** è un silicone fluido scansionabile che completa la gamma. Scansionabile e leggibile senza l'uso di spray riflettenti, è pensato per garantire la massima performance nell'acquisizione dei dati 3D.

Zhermack propone la **mascherina gengivale** più adatta per ogni tipo di applicazione.

Prodotto	Adatto in presenza di sottosquadri	Adatto in presenza di impianti
Gingifast Elastic	•	0
Gingifast Rigid	0	•
Gingifast CAD Elastic	•	•
Gingifast CAD Rigid	0	•

1. GINGIFAST RIGID

TECNICA DIRETTA

Si esegue direttamente sull'impronta, è la tecnica ideale in implantoprotesi.


Materiali utilizzati: Hydrorise Implant, Gingifast Rigid, Elite Rock.









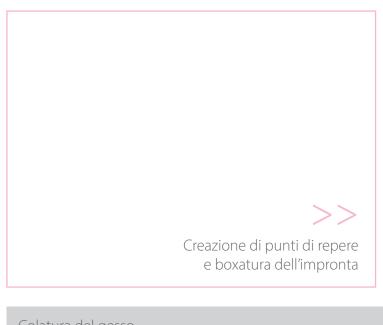







2. GINGIFAST ELASTIC

TECNICA INDIRETTA

Si esegue direttamente sul modello in gesso, è la tecnica consigliata per la riproduzione gengivale in caso di monconi naturali.

Materiali utilizzati: Gingifast Elastic, Zetalabor, Elite Base, Elite Rock.











Creazione di fori per l'iniezione di silicone e applicazione del separatore sulla mascherina








Iniezione di Gingifast Elastic completata (fuoriuscita materiale dai canali di sfogo)





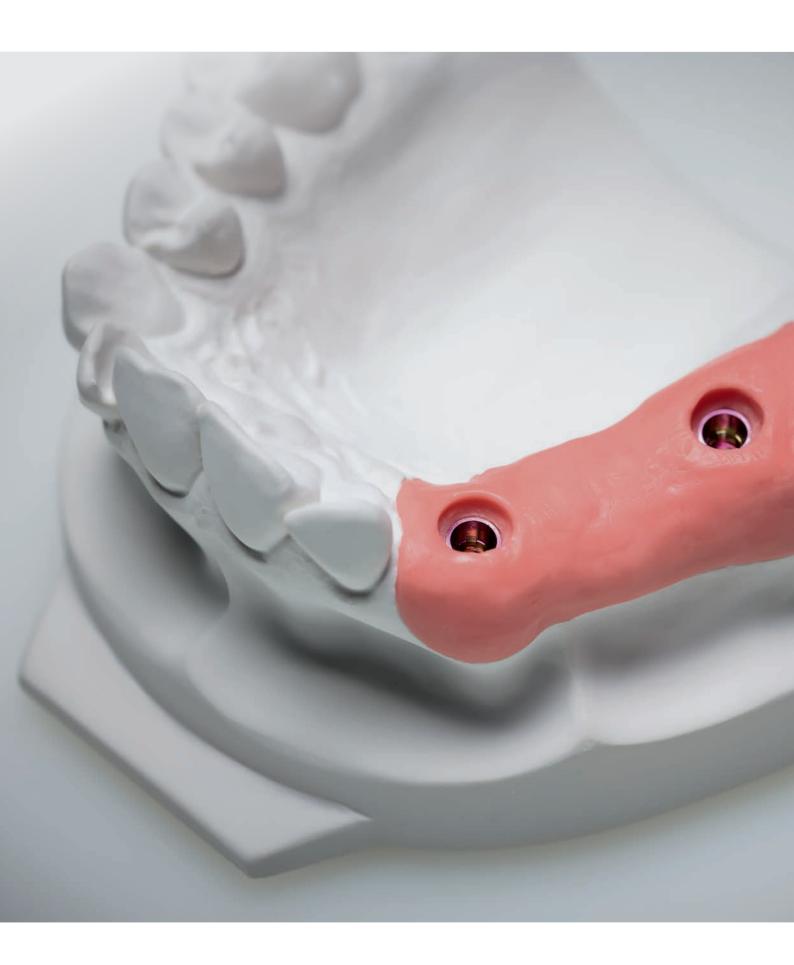



Prodotto	Rapporto di miscelazione (Base:Catalyst)	Tempo di lavorazione* (min:s)	Tempo di presa* (min:s)	Durezza (Shore A)	Scansionabile senza spray	Lavorabile con fresa
Gingifast Elastic	1:1	2:00	10:00	40		
Gingifast Rigid	1:1	2:00	10:00	70		•
Gingifast CAD Elastic	1:1	2:00	10:00	40	•	•
Gingifast CAD Rigid	1:1	2:00	10:00	70	•	•

^{*}I tempi indicati si riferiscono al momento di inizio della fase di miscelazione ad una temperatura di 23 °C (73 °F).

Codici



Gingifast Elastic - Silicone per addizione per la riproduzione gengivale

Codice	Confezionamento
C401500	2 cartucce da 50 ml + 1 flacone di Separator per Gingifast da 10 ml + 12 puntali di miscelazioni (small) + 12 puntali intraorali gialli + 1 nebulizzatore spray



Gingifast Rigid - Silicone per addizione per la riproduzione gengivale

Codice	Confezionamento
C401520	2 cartucce da 50 ml + 1 flacone di Separator per Gingifast da 10 ml + 12 puntali di miscelazioni (small) + 12 puntali intraorali gialli + 1 nebulizzatore spray



Gingifast CAD Elastic - Silicone per addizione scansionabile per la riproduzione gengivale

Codice	Confezionamento
C203227	2 cartucce da 50 ml + 1 flacone di Separator per Gingifast da 10 ml + 12 puntali (extra small)



Gingifast CAD Rigid - Silicone per addizione scansionabile per la riproduzione gengivale

Codice	Confezionamento
C203232	2 cartucce da 50 ml + 1 flacone di Separator per Gingifast da 10 ml + 12 puntali (extra small)

Accessori












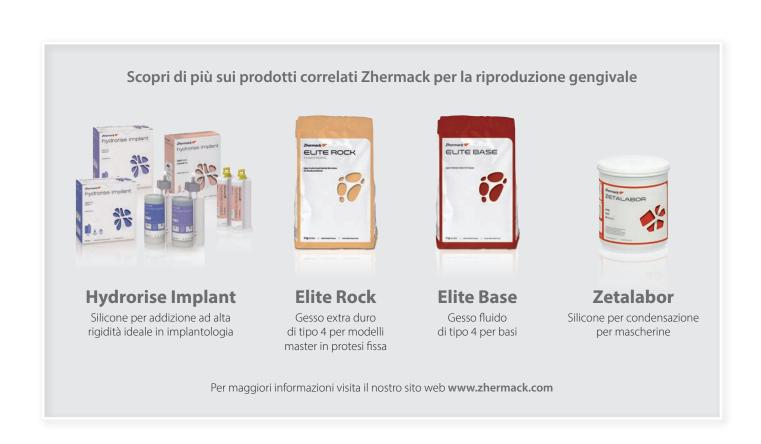

Fulfilling your needs

