

modulmix



Equipment
Automatic mixing unit

Zhermack 
Dental



**Design
Modulare e
Compatto**

modulmix

ZHERMACK leader mondiale nella produzione di materiali da impronta e apparecchiature per uso dentale, presenta **MODULMIX**, il miscelatore automatico di **Siliconi-A** con rapporto di miscelazione 5:1.

Prestazioni ai massimi livelli associate al design modulare permettono a **MODULMIX** di integrarsi al meglio in qualsiasi ambiente di lavoro.

La versatilità è la caratteristica principale di **MODULMIX**. Scegliete la versione che fa per voi e provate le prestazioni uniche di questo innovativo miscelatore automatico.

MODULMIX, è il risultato della ricerca avanzata Zhermack per garantire alte prestazioni, ottima qualità e funzionalità.

modulmix



APPLICAZIONI



■ Riempimento portaimpronta ad alta velocità con heavy body o putty nella tecnica d'impronta heavy/putty-light



■ Riempimento siringa a bassa velocità con prodotto medium body nella tecnica d'impronta monophas



■ Riempimento portaimpronta ad alta velocità con Alginate Replacement

**Pulsante a doppia funzione,
due velocità di erogazione facilmente modulabili
con la sola pressione di un dito.**

modulmix

CARATTERISTICHE

- Possibilità di collegare più macchine in linea
- Doppia velocità di erogazione:
bassa velocità: 70* ml/min
alta velocità: 155* ml/min
- Avanzamento ed arretramento motorizzato dei pistoni per velocizzare la sostituzione della cartuccia (3 sec max)
- Design ergonomico
- Pulsante di erogazione per destrimani e mancini
- Indicatore del livello di silicone residuo nella cartuccia
- Pistoni con salvadita per garantire il massimo standard di sicurezza
- Predisposizione a banco e parete
- Timer digitale in dotazione
- Disponibile nelle versioni 230V e 115V
- Compatibile con tutti i sistemi 5:1 attualmente disponibili sul mercato





Il design modulare di **MODULMIX** (brevettato da Zhermack) è stato progettato appositamente per gli studi dentistici che necessitano l'utilizzo di più materiali da impronta contemporaneamente.



Premendo un solo pulsante si possono selezionare due velocità e modulare l'erogazione del materiale a seconda della proprie necessità. Ad alta velocità è possibile riempire un portaimpronta in tempi da record (155 ml /min*). La bassa velocità (70 ml/min*) invece, è consigliata per il riempimento delle siringhe per elastomeri.

modulmix

IN EVIDENZA



Lo sportello di sicurezza trasparente permette di vedere il tipo di prodotto utilizzato, i tempi di lavorazione, di presa e il livello di prodotto residuo.



L'avanzamento-arretramento motorizzato dei pistoni è velocissimo. Azionando il comando, in soli 3 secondi si possono arretrare i pistoni e sostituire la cartuccia.



Il nuovo puntale dinamico-statico (brevettato da Zhermack) assieme a **MODULMIX** assicura la massima omogeneità di miscelazione.

Progettato per qualsiasi stile di lavoro, in versione singola o modulare, da banco o da parete,
MODULMIX risponde alle esigenze del professionista.

modulmix

PERSONALIZZAZIONE



Configurazione
singola da banco



Configurazione
modulare da banco




Configurazione
singola da parete



Configurazione
modulare da parete

La miscelazione automatica a doppia velocità abbinata all'innovativo puntale dinamico-statico* garantisce la massima omogeneità di miscelazione (senza bolle d'aria) mantenendo al contempo inalterata la reattività del prodotto.

TECNICA IN EVIDENZA

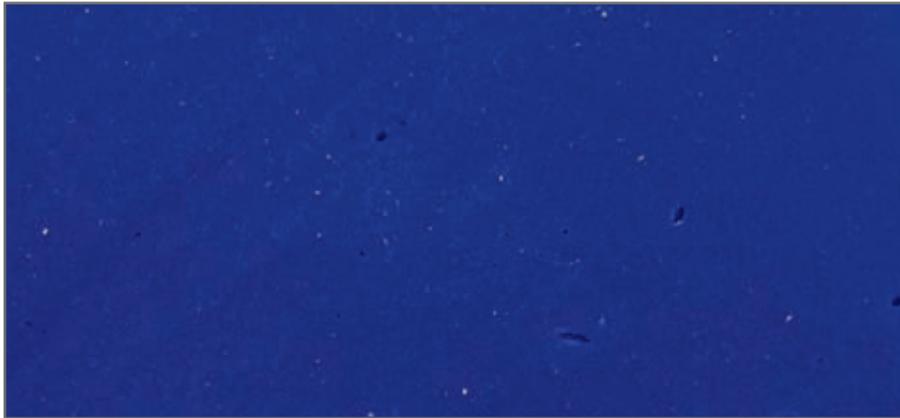

Ingrandimento di una miscelazione automatica ottenuta con un normale heavy body in cartuccia 380 ml standard



Ingrandimento di una miscelazione ottenuta con MODULMIX e HYDRORISE heavy body in cartuccia 380 ml Zhermack

- **MODULMIX** riduce notevolmente la fase di miscelazione offrendo maggior tempo di lavorazione del prodotto
- La miscelazione automatica con il sistema brevettato da Zhermack risulta semplice, costante e di qualità superiore rispetto alla miscelazione manuale

- Utilizzando Silicone-A in cartuccia da 380 ml il costo della singola impronta si riduce di circa il 50% rispetto all'utilizzo dello stesso prodotto in cartucce da 50 ml
- L'erogazione automatica elimina lo sforzo dell'operatore nel miscelare e dosare manualmente il silicone

modulmix

F111022 - 2016-03



Modelli

Codice	Modello	Dimensione	Peso	Tensione	Potenza assorbita
C309030	MISCELATORE AUTOMATICO MODULMIX 230V	L224 / P372/ H320	10 kg	230V ± 10% 50/60 Hz	160W
C309031	MISCELATORE AUTOMATICO MODULMIX 230V UK	L224 / P372/ H320	10 kg	230V ± 10% 50/60 Hz	160W
C309035	MISCELATORE AUTOMATICO MODULMIX 115V	L224 / P372/ H320	10 kg	115V ± 10% 50/60 Hz	160W

Accessori

XR0240520	Kit fissaggio a parete per una Modulmix
XR0240530	Kit fissaggio a parete per due Modulmix
XR0240500	Supporto da banco per due Modulmix

Dotazione di serie - Modulmix

XR0240555	Bandelle laterali colore grigio
XR0240505	Supporto da banco per 1 Modulmix
XR0240631	Alimentatore 230 V
XR0240580	Timer Digitale

BRANCHES

GERMANY

Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND

Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
+48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA

Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

Zhermack