

modulmix



Equipment
Automatic mixing unit

Zhermack 
Dental



**Diseño
Modular y
Compacto**

modulmix

ZHERMACK líder mundial en la producción de materiales de impresiones y aparatos para uso dental, presenta **MODULMIX**, el mezclador automático de **Siliconi-A con relación de mezcla 5.1**.

Sus prestaciones a máximos niveles junto con su diseño modular permiten a **MODULMIX** de integrarse del mejor modo posible en cualquier ambiente de trabajo.

La versatilidad es la característica principal de **MODULMIX**. Escoja la versión más adecuada para usted y pruebe las prestaciones únicas de este innovador mezclador automático.

MODULMIX, el mezclador automático para siliconas-A con una relación 5:1, es el resultado de la investigación avanzada de Zhermack para obtener altas prestaciones, óptima calidad y funcionalidad.

modulmix



APLICACIONES



■ Llenado cubeta a alta velocidad con heavy body o putty en la técnica de impresión heavy/putty light.



■ Llenado cubeta y jeringa a baja velocidad con producto medium body en la técnica de impresión monofásica.



■ Llenado cubeta a alta velocidad con alginato alternativo para impresión antagonista en la técnica de impresión simultánea.

**Dos velocidades de suministro
fácilmente modulables sólo con la presión del dedo
sobre el botón de doble función.**

modulmix

CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de conectar varias máquinas en línea
- Doble velocidad de suministro:
baja velocidad: 70* ml/minuto.
alta velocidad: 155* ml/minuto.
- Avance y retroceso motorizado de los pistones para acelerar la sustitución del cartucho (3 seg. Máx.)
- Diseño ergonómico
- Botón de suministro para diestros y zurdos
- Indicador del nivel de silicona residual en el cartucho
- Pistones con salvadedos para garantizar el máximo estándar de seguridad
- Predispuesta para el posicionamiento en banco y pared
- Temporizador digital en dotación
- Disponible en las versiones 230 V y 115 V
- Compatible con todos los sistemas 5:1 disponibles actualmente en el mercado





El diseño modular patentado de **MODULMIX** ha sido estudiado específicamente para los gabinetes odontológicos que necesitan del uso de varios materiales de impresiones contemporáneamente.



Pulsando un solo botón se pueden seleccionar dos velocidades y modular el suministro de material en función de las necesidades. A alta velocidad se puede llenar una cubeta en tiempos récord (155ml/min*). La baja velocidad (70ml/min*), en cambio, es aconsejada para el llenado de las jeringas para elastómeros.

modulmix

EN EVIDENCIA



La tapa de seguridad transparente permite ver el tipo de producto utilizado, los tiempos de fraguado y de trabajo indicados en el cartucho y el nivel del producto residual.



El avance-retroceso motorizado de los pistones es muy rápido. Accionando el mando, en solo 3 segundos se pueden retroceder los pistones y sustituir el cartucho.



La nueva punta dinámico-estática patentada por Zhermack ofrece la máxima homogeneidad de mezcla.

Diseñado para cualquier estilo de trabajo, en versión individual o modular, de consola o de pared.

MODULMIX se inspira en las exigencias del profesional.

modulmix

PERSONALIZACIÓN



Configuración individual de consola



Configuración Modular de consola




Configuración individual de pared



Configuración modular de pared

La mezcla automática de doble velocidad combinada a la punta innovadora de mezcla dinámico-estático* garantiza la máxima homogeneidad de mezcla (sin burbujas de aire) manteniendo al mismo tiempo inalterada la reactividad del producto.

TÉCNICA EN EVIDENCIA

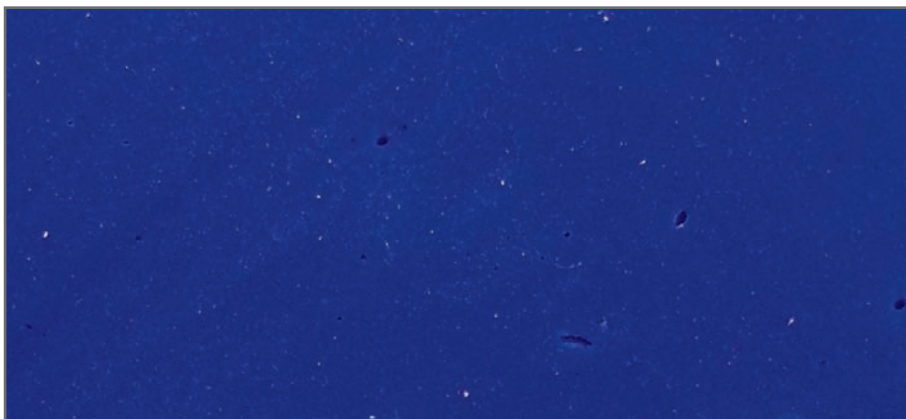

Ampliación de una mezcla automática con heavy body en cartucho económico de 380 ml estándar



Ampliación de una mezcla con MODULMIX y HYDRORISE heavy body en cartucho de 380 ml de Zhermack

- Con **MODULMIX** se reduce notablemente la fase de mezclado con la ventaja de disponer de un mayor tiempo de trabajo del producto.
- La mezcla automática del sistema Zhermack resulta fácil, constante y de calidad superior, respecto a la mezcla manual.

- Utilizando Silicona-A en cartucho económico de 380 ml el coste de la impresión se reduce del 50% respecto al uso del mismo producto confeccionado en cartuchos estándar de 50 ml.
- La erogación automática elimina el esfuerzo del operador en mezclar y dosificar el producto en la cubeta.

modulmix

F131025 - 2016-02



Modelos

Código	Modelo	Dimensión	Peso	Tensión	Potencia absorbida
C309030	MEZCLADOR AUTOMÁTICO MODULMIX 230 V	L224 / P372 / H320 mm	10 kg	230V ± 10% 50/60 Hz	160 W
C309035	MEZCLADOR AUTOMÁTICO MODULMIX 115 V	L224 / P372 / H320 mm	10 kg	115V ± 10% 50/60 Hz	160 W
C309031	MEZCLADOR AUTOMÁTICO MODULMIX 230 V UK	L224 / P372 / H320 mm	10 kg	230V ± 10% 50/60 Hz	160 W

Accesorios

XR0240520	Kit de fijación a la pared
XR0240530	Kit de fijación a la pared para dos Modulmix
XR0240500	Soporte de banco para dos Modulmix

Dotación de serie - Modulmix

XR0240555	Bandas laterales color gris
XR0240505	Soporte de banco para 1 Modulmix
XR0240630N	Alimentador 230 V
XR0240580	Temporizador digital

BRANCHES

GERMANY

Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND

Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
+48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA

Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

Zhermack