

hydrorise

Hydrorise y Modulmix: la excelencia de una combinación perfecta.

El sistema HYDRORISE se completa con la nueva mezcladora automática MODULMIX y los cartuchos en proporción 5:1, estudiados y patentados por ZHERMACK para ofrecer a los profesionales la máxima flexibilidad y comodidad.

Modularidad

Es posible conectar varias mezcladoras en línea, (putty, heavy body, monophase, alginate replacement).



Nuevo cartucho 5:1

HYDRORISE en formato maxi de 380 ml se presenta en el nuevo cartucho estudiado para ser combinado a MODULMIX, compatible con los principales mezcladores automáticos 5:1 presentes en el mercado.

- **Fácil de montar y listo para utilizar.**
- **Nueva punta dinámico/estática para una mezcla perfecta sin sobrecalentar el material y reduciendo el desperdicio de material de un 20%*.**
- **Nuevo traba-puntas, para una fijación rápida y segura.**



Doble velocidad

Pulsando un sólo botón se puede seleccionar la velocidad y **regular la salida del material según las propias necesidades.**

Diseño moderno

La línea compacta y funcional garantiza **dimensiones reducidas ya sea en el uso sobre banco de trabajo que en la pared.**

Calidad de mezcla

La perfecta dosificación de los componentes, garantiza una **mezcla homogénea.**



Confecciones		
C207000	HYDRORISE LIGHT NORMAL SET	2 cartuchos de 50 ml + 12 puntas mezcladoras amarillas
C207001	HYDRORISE LIGHT FAST SET	2 cartuchos de 50 ml + 12 puntas mezcladoras amarillas
C207002	HYDRORISE EXTRA LIGHT NORMAL SET	2 cartuchos de 50 ml + 12 puntas mezcladoras amarillas
C207003	HYDRORISE EXTRA LIGHT FAST SET	2 cartuchos de 50 ml + 12 puntas mezcladoras amarillas
C207004	HYDRORISE REGULAR NORMAL SET	2 cartuchos de 50 ml + 12 puntas mezcladoras rosas
C207005	HYDRORISE REGULAR FAST SET	2 cartuchos de 50 ml + 12 puntas mezcladoras rosas
C207006	HYDRORISE MONOPHASE NORMAL SET	2 cartuchos de 50 ml + 6 puntas mezcladoras rosas
C207007	HYDRORISE MONOPHASE FAST SET	2 cartuchos de 50 ml + 6 puntas mezcladoras rosas
C207008	HYDRORISE HEAVY BODY NORMAL SET	2 cartuchos de 50 ml + 6 puntas mezcladoras verdes
C207009	HYDRORISE HEAVY BODY FAST SET	2 cartuchos de 50 ml + 6 puntas mezcladoras verdes
C207010	HYDRORISE PUTTY NORMAL SET	2 botes (base + catalizador) de 300 ml
C207011	HYDRORISE PUTTY FAST SET	2 botes (base + catalizador) de 300 ml
C207012	HYDRORISE PUTTY NORMAL SET	2 botes (base + catalizador) de 900 ml
C207013	HYDRORISE PUTTY FAST SET	2 botes (base + catalizador) de 900 ml
C207040	HYDRORISE MAXI MONOPHASE NORMAL SET	2 cartuchos de 380 ml + 15 puntas mezcladoras dinámico/estáticas + 2 traba-puntas + 1 jeringa para elastómeros + 15 puntas intraorales
C207041	HYDRORISE MAXI MONOPHASE FAST SET	2 cartuchos de 380 ml + 15 puntas mezcladoras dinámico/estáticas + 2 traba-puntas + 1 jeringa para elastómeros + 15 puntas intraorales
C207042	HYDRORISE MAXI HEAVY BODY NORMAL SET	2 cartuchos de 380 ml + 15 puntas mezcladoras dinámico/estáticas + 2 traba-puntas
C207043	HYDRORISE MAXI HEAVY BODY FAST SET	2 cartuchos de 380 ml + 15 puntas mezcladoras dinámico/estáticas + 2 traba-puntas
C207044	HYDRORISE MAXI PUTTY NORMAL SET	2 cartuchos de 380 ml + 15 puntas mezcladoras dinámico/estáticas + 2 traba-puntas
C207045	HYDRORISE MAXI PUTTY FAST SET	2 cartuchos de 380 ml + 15 puntas mezcladoras dinámico/estáticas + 2 traba-puntas
C207060	HYDRORISE MAXI MONOPHASE NORMAL SET	6 cartuchos de 380 ml + 2 traba-puntas + 3 jeringas para elastómeros + 45 puntas intraorales
C207061	HYDRORISE MAXI MONOPHASE FAST SET	6 cartuchos de 380 ml + 2 traba-puntas + 3 jeringas para elastómeros + 45 puntas intraorales
C207062	HYDRORISE MAXI HEAVY BODY NORMAL SET	6 cartuchos de 380 ml + 2 traba-puntas
C207063	HYDRORISE MAXI HEAVY BODY FAST SET	6 cartuchos de 380 ml + 2 traba-puntas
C207064	HYDRORISE MAXI PUTTY NORMAL SET	6 cartuchos de 380 ml + 2 traba-puntas
C207065	HYDRORISE MAXI PUTTY FAST SET	6 cartuchos de 380 ml + 2 traba-puntas

Accesorios			Aparatología	
C205530	DYNAMIC-STATIC MIXING TIPS	Puntas mezcladoras dinámico/estáticas (50 pzs)	C205500	MIXING TIPS MEDIUM Puntas mezcladoras rosas (48 pzs)
C205540	MIXING TIP LOCKERS	Traba-puntas (2 pzs)	C202090	ORAL TIPS Puntas intraorales amarillas (48 pzs)
C202080	MIXING TIPS STANDARD	Puntas mezcladoras verdes (48 pzs)	C202100	DISPENSER D2 Dispensador D2 - 1:1
C202070	MIXING TIPS SMALL	Puntas mezcladoras amarillas (48 pzs)	C700025	UNIVERSAL TRAY ADHESIVE - 1 FRASCO 10 ml

BRANCHES					
GERMANY Zhermack GmbH Deutschland Ohlmühle 10 - D-49448 Marl		T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0 F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11 info@zhermack.de www.zhermack.de	POLAND Zhermapol Sp. z o.o. ul. Augustówka 14 02 - 981 Warszawa - Polska		T +48 22 858 82 72 +48 22 292 71 17 F +48 22 642 07 14 biuro@zhermack.com www.zhermapol.pl
USA Zhermack Inc. P.O. Box 4195, River Edge New Jersey 07661 - 4195		T +1 (877) 819 6206 +1 (732) 389 8540 F +1 (732) 389 8543 info@zhermackusa.com www.zhermackusa.com			

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

Zhermack

hydrorise

F131028 - 2016-05

Las fotos son ilustrativas y puramente indicativas - Copyright © 2014 Zhermack SpA - All Rights Reserved



Clinical
Addition Silicones

Zhermack
Dental

Zhermack
Dental

*Fuente: datos internos de Zhermack

Hydrorise,

la innovación que no existía.


ZHERMACK presenta HYDRORISE,
La Silicona A que se adapta a varias técnicas de impresión
en las diferentes situación clínica,

ya que permite combinar distintas viscosidades según el caso específico,
así como escoger el tiempo justo para cada método de trabajo.

La performance exclusiva de HYDRORISE deriva
de una nueva tecnología llamada
“hiperhidrofilia”,
capaz de incrementar la fluidez de la silicona mejorando sensiblemente
el detalle de la impresión.



Hyperhydrophilic technology

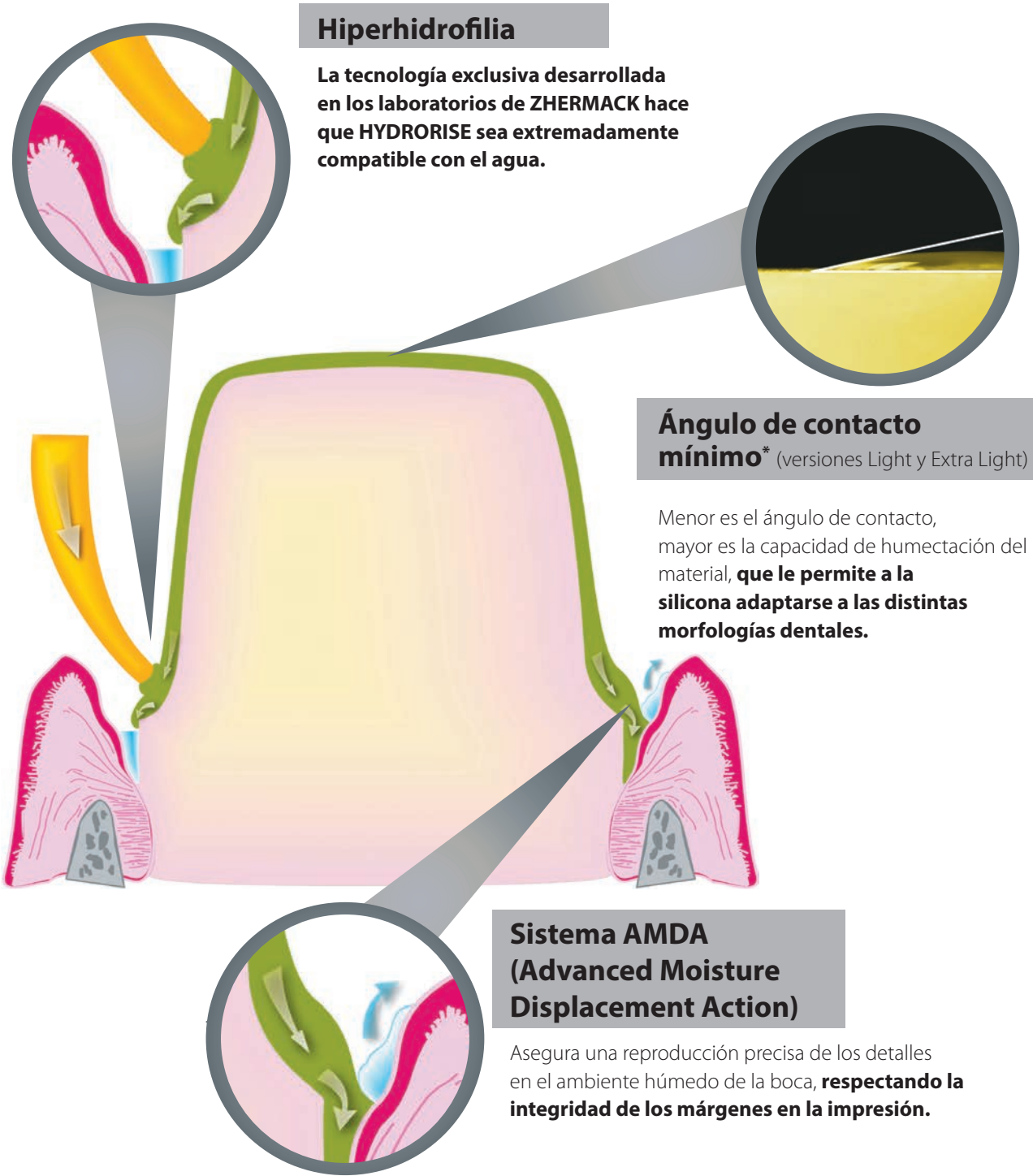

hydrorise

Un resultado fiable, para el dentista y para el paciente.

La sinergia de las propiedades físicas y mecánicas
de HYDRORISE contribuye al éxito clínico.

Tixotropía

Es la capacidad de la silicona de mantener la posición donde es colocada y de deslizarse cuando es sometida a presión. **De este modo HYDRORISE no escurre de la preparación ni en la garganta del paciente.**



Resistencia a la rotura

HYDRORISE es extremadamente elástico, sobre todo cuando existen zonas muy retentivas. **El material no se rompe y la impresión no se distorsiona durante remoción de la cavidad bucal.**



Soluciones siempre diferentes, el dentista es quién elige.

HYDRORISE ha sido estudiado para combinar las diferentes viscosidades en base al propio método de trabajo.

Material	Doble impresión	Simultanea	Monofase
PUTTY			
HEAVY BODY			
MONOPHASE			
REGULAR BODY			
LIGHT BODY			
EXTRA LIGHT BODY			

Todas las viscosidades están disponibles en
NORMAL SET (tiempo de trabajo 2' - tiempo de fraguado 5' 30")
y FAST SET (tiempo de trabajo 1' 30" - tiempo de fraguado 4').