

# ***alghamix II***



**Equipment**  
Mixing machine

**Zhermack**   
Dental



# *alghamix II*

**ZHERMACK**, líder mundial en la producción de materiales para impresiones y aparatología de uso dental, presenta **ALGHAMIX II**, la **nueva versión** de uno de los **mezcladores mecánicos** más conocido del mercado.

**Fácil de utilizar**, garantiza mezclas perfectas sin presencia de burbujas.

**ALGHAMIX II** permite la mezcla mecánica de **alginatos, yesos y siliconas** para uso dental

**Diseño  
Moderno**



# ***alghamix II***

## **APLICACIONES**

■ Mezcla de alginatos



■ Mezcla de siliconas



■ Mezcla de yesos



El **tazón**, situado en la **parte frontal**, agiliza las operaciones de dosificación y mezcla, garantizando al mismo tiempo la **máxima estabilidad** durante todas las fases de trabajo.

**Máxima  
Estabilidad**

## ***CARACTERÍSTICAS***

# ***alghamix II***

- Doble velocidad de rotación de la taza (120 / 250 r.p.m)
- Selector de velocidades ergonómico
- Acoplamiento de la taza tipo bayoneta
- Tazas disponibles: pequeña (350 cc) y grande (600 cc)
- Plato con bloc de mezcla para siliconas
- No precisa lubricación
- No requiere mantenimiento







#### ■ DOBLE VELOCIDAD:

las 2 velocidades de rotación de la taza (lenta y rápida) permiten modular la mezcla según las preferencias del operador



#### ■ SELECTOR ERGONÓMICO:

el selector de velocidad, gracias a su forma ergonómica, hace extremadamente natural el movimiento de selección de la velocidad.



#### ■ ACOPLAMIENTO TIPO BAYONETA:

con indicador de posición para simplificar la fijación de la taza

# alghamix II

## EN EVIDENCIA



#### ■ TAZAS DE COLORES PARA ALGINATOS:

350cc disponibles en 2 colores a elegir



#### ■ TAZA PARA YESOS:

disponibile nella versione da 600 cc.



#### ■ DISCO DE MEZCLA PARA SILICONAS:

disponible con bloc de mezcla de 20 hojas.




**ALGHAMIX II** garantiza la máxima **homogeneidad de mezcla** con una ausencia total de burbujas y grumos.

**ALGHAMIX II** reduce el tiempo de mezcla en un 30%.\*

# ***alghamix II*** TÉCNICA EN EVIDENCIA



*Ampliación de una mezcla manual de alginato*

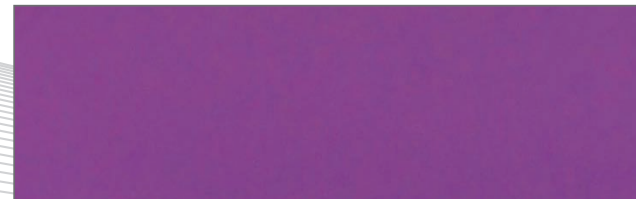

*Ampliación de una mezcla automática de alginato con ALGHAMIX II*



# alghamix II



## Modelos

Código	Modelo	Medidas externas	Peso	Tensión de alimentación	Potencia absorbida
C303215	ALGHAMIX II 115V	P 270 – L 170 – A 210 mm	3 kg	115 V ± 10 50/60 Hz	50 Watt
C303230	ALGHAMIX II 230V	P 270 – L 170 – A 210 mm	3 kg	230 V ± 10 50/60 Hz	50 Watt
C303231	ALGHAMIX II 230V UK	P 270 – L 170 – A 210 mm	3 kg	230 V ± 10 50/60 Hz	50 Watt

## Dotación de serie

Modelo
Taza para alginato gris 350 cc
Espátula de mezcla

## Accesorios

C303165	ALGHAMIX II TAZA 350 cc AZUL	C300990	Espátulas fluo 6 uds
C303185	ALGHAMIX II taza para yeso 600 cc gris	C303030	Bloc de mezcla 20 hojas
XR0250670	Disco para mezcla de siliconas	C207200	Espátula para mezcla de siliconas

## BRANCHES

**GERMANY**  
**Zhermack GmbH Deutschland**  
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0  
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11  
info@zhermack.de  
www.zhermack.de

**POLAND**  
**Zhermapol Sp. z o.o.**  
ul. Augustówka 14  
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72  
+48 22 292 71 17  
F +48 22 642 07 14  
biuro@zhermack.com  
www.zhermapol.pl

**USA**  
**Zhermack Inc.**  
P.O. Box 4195, River Edge  
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206  
+1 (732) 389 8540  
F +1 (732) 389 8543  
info@zhermackusa.com  
www.zhermackusa.com

**Zhermack S.p.A.** | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY  
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

**Zhermack**