

**SYSTEM**

# **zetaplus**



**Clinical**

*C-Silicone Impression Material*

**Zhermack**   
Dental

# ***zetaplus system***

**Solutions pour chaque situation clinique.**

**ZHERMACK** confirme le succès du **ZETAPLUS SYSTEM**.

**ZETAPLUS SYSTEM**, apprécié dans le monde entier depuis 25 ans, a maintenu au cours des années de très bons résultats cliniques et une fiabilité constante pour atteindre le meilleur résultat prosthétique.

***zetaplus***

***zetaplus soft***

***oranwash L***

***thixoflex M***

***oranwash VL***

## RÉDUCTION DU RISQUE D'ERREUR

› **Contraste chromatique évident** pour une **diminution du risque d'erreur** permettant une **économie de temps** et de **matériel**.

## REACTIVITE ÉQUILBRÉE

- › **Rapport idéal** entre le temps de travail et le temps de prise (effet «**snap-set**»).
- › **Dosage optimal** du catalyseur qui augmente le temps utile de travail en diminuant la contraction de l'empreinte.

## EFFET "FLOW CONDITIONING"

› Augmentation de la **fluidité et stabilité dimensionnelle extrême** grâce à la technologie des charges sphéroïdales de haute activité SAS (Synthetic Amorphous Silicas).

# ***zetaplus system***

## Effet “flow conditioning” pour une empreinte de haute définition.

### ZETAPLUS AVEC ORANWASH L ET THIXOFLEX M

#### ZETAPLUS, fluidité initiale et rigidité finale

L’effet “flow conditioning” favorise la **fluidité** du matériel et **réduit la compression** des muqueuses. **ZETAPLUS** est le **putty** qui, pour sa **rigidité finale**, est conseillé dans la technique de la double empreinte.

#### ORANWASH L, hydrophilie et fluidité

Le silicone **light hydrophile**, a haute **fluidité**, conseillé pour la technique de la double empreinte.

#### THIXOFLEX M, thixotropie, fluidité et hydrophilie

Le silicone **light, thixotropique** particulièrement **fluide**, garantit une **lecture précise des détails** en milieu humide grâce à son hydrophilie accentuée. Il est indiqué pour la technique simultanée.



Fluidité par effet “flow conditioning”



Fluidité dans le sillon gingival

## ZETAPLUS SOFT AVEC ORANWASH VL

### ZETAPLUS SOFT, fluidité et élasticité


Le silicone **putty, fluide** et **élastique**, adapté à toute situation clinique, est particulièrement conseillé pour la technique simultanée.



Rigidité optimale

### ORANWASH VL, hydrophilie et fluidité élevée

Le silicone **very light, hydrophile** a très haute **fluidité**, conseillé pour toutes les techniques d'empreinte.

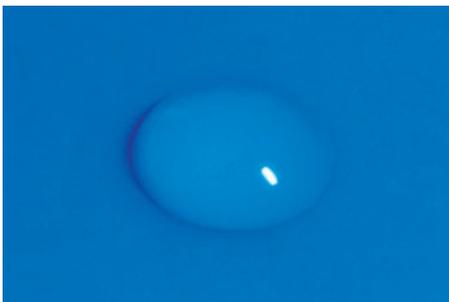

Hydrophilie après 1 minute




Fluidité dans le travail

# Indurent gel et zetaplus system

## Le contraste chromatique idéal.

Le catalyseur **INDURENT GEL** garantit un **mélange homogène** pour l'utilisation tant **avec les putty, qu'avec les fluides** du **ZETAPLUS SYSTEM**.

Rapport idéal entre temps de travail et temps de prise

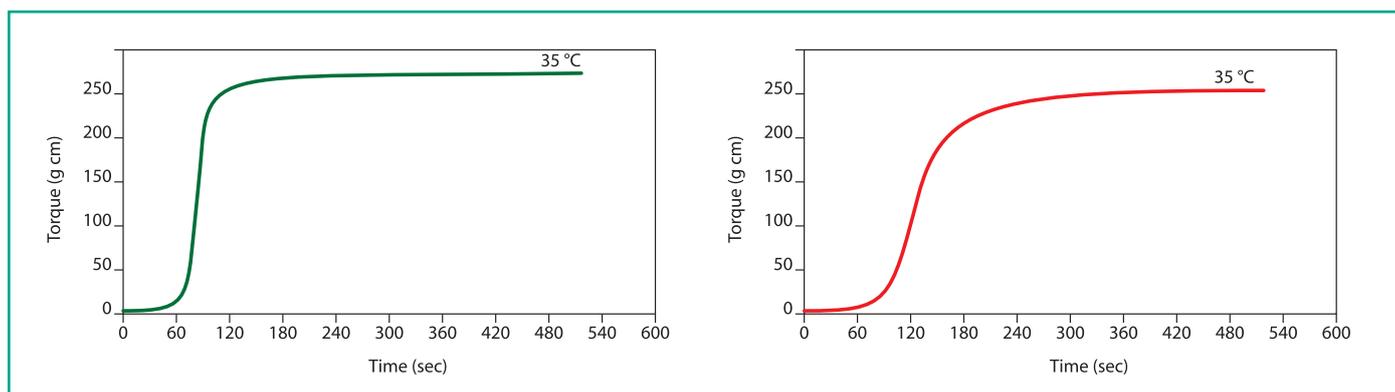

Effet SNAP-SET (*zetaplus - zetaplus soft*)

Effet SNAP-SET (*oranwash VL – oranwash L*)

### DONNÉES TECHNIQUES

	ZETAPLUS	ZETAPLUS SOFT	ORANWASH VL	ORANWASH L	THIXOFLEX M
Temps de mélange	30 sec.	30 sec.	30 sec.	30 sec.	30 sec.
Temps de travail total de manipulation	1 min. 15 sec.	1 min. 15 sec.	1 min. 30 sec.	1 min. 30 sec.	2 min.
Temps de séjour dans la cavité orale	3 min. 15 sec.	3 min. 15 sec.	3 min. 30 sec.	3 min. 30 sec.	3 min. 30 sec.
Temps de prise	4 min. 30 sec.	4 min. 30 sec.	5 min.	5 min.	5 min. 30 sec.
Déformation à la compression (min/max.)	2% - 5%	2% - 5%	2% - 8%	2% - 8%	2% - 8%
Reprise élastique	> 98%	> 98%	> 99%	> 99%	> 99%
Stabilité dimensionnelle	< -0,2%	< -0,2%	< -0,7%	< -0,7%	< -0,7%

Résultats *ZETAPLUS SYSTEM*

A close-up photograph of a dental mold, likely for a dental crown or bridge. The mold is made of a light-colored material and features several circular and oval-shaped cavities. The cavities are filled with a dark, translucent material, possibly a wax or resin. The mold is set against a background of soft, out-of-focus colors in shades of orange, yellow, and green.

**zetaplus system**  
**Fiable dans toutes les situations.**

**Zhermack**   
Dental

**SYSTEM****zetaplus****Conditionnements**

C100600 ZETAPLUS	1 pot de 900 ml/1.53 Kg + gobelet de mesure
C100312 ZETAPLUS	1 pot de 1800 ml/3 Kg + gobelet de mesure
C100468 ZETAPLUS	1 boîte de 10 Kg + gobelet de mesure
C100730 ZETAPLUS INTRO KIT L	1 pot Zetaplus, 900 ml/1.53 Kg + gobelet de mesure + 1 tube Oranwash L, 140 ml + 1 tube Indurent gel, 60 ml + bloc de mélange
C100720 ZETAPLUS TRIAL KIT L	1 pot Zetaplus, 200 ml + gobelet de mesure + 1 tube Oranwash L, 40 ml + 1 tube Indurent gel, 60 ml + bloc de mélange
C100610 ZETAPLUS SOFT	1 pot de 900 ml/1.53 Kg + gobelet de mesure
C100740 ZETAPLUS SOFT INTRO KIT VL	1 pot Zetaplus Soft, 900 ml/1.53 Kg + gobelet de mesure + 1 tube Oranwash VL, 140 ml + 1 tube Indurent gel, 60 ml + bloc de mélange
C100650 ORANWASH VL	1 tube de 140 ml
C100660 ORANWASH L	1 tube de 140 ml
C100670 THIXOFLEX M	1 tube de 140 ml

**Catalyseurs**

C100700 INDURENT GEL	1 tube de 60 ml en gel
----------------------	------------------------

**Appareils**

C303230 ALGHAMIX II	Mélangeur automatique pour silicones et alginates (230 V)*
C303215 ALGHAMIX II	Mélangeur automatique pour silicones et alginates (115 V)*

**Accessoires**

C207200	Spatule pour silicones, en acier inox, laminée, stérilisable. Cond. 1 Spatule
C303020	Bloc de mélange, 15 feuillets
XR0250670	Disque pour silicone avec 3 blocs de mélange pour Alghamix
C207201	Bloc de mélange pour Alghamix, 20 feuillets
D510010	Putty cut

\*Disque pour silicones disponible comme accessoire

**BRANCHES****GERMANY**

**Zhermack GmbH Deutschland**  
 Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0  
 F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11  
 info@zhermack.de  
 www.zhermack.de

**POLAND**

**Zhermapol Sp. z o.o.**  
 ul. Augustówka 14  
 02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72  
 +48 22 292 71 17  
 F +48 22 642 07 14  
 biuro@zhermack.com  
 www.zhermapol.pl

**USA**

**Zhermack Inc.**  
 P.O. Box 4195, River Edge  
 New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206  
 +1 (732) 389 8540  
 F +1 (732) 389 8543  
 info@zhermackusa.com  
 www.zhermackusa.com

**Zhermack S.p.A.** | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY  
 T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

**Zhermack**