

doublemix



Equipment

Duplication silicone dispensing unit

Zhermack 
Dental



doublemix

DOUBLEMIX est le nouveau mélangeur automatique de **silicones A** pour la duplication développé par **ZHERMACK**, afin d'offrir une vitesse et une qualité constante dans les duplications au quotidien.

Sa simplicité d'usage et sa compatibilité avec **elite double extra fast** (1 kg et 5 kg) font que **DOUBLEMIX est** extrêmement flexible.

Son design simple et moderne s'adapte parfaitement à tout sorte de laboratoire de prothèse dentaire et la solidité du matériel dont il a été réalisé garantissent une longévité maximale.

doublemix

**Design
Moderne**





DOUBLEMIX simplifie le processus de mélange au quotidien étant donné qu'il mélange rapidement le silicone et obtient le **maximum de rendement** possible.

APPLICATIONS

doublemix

■ Duplications unitaires



■ Duplications en série



**Flux
orientable**



CARACTÉRISTIQUES

- Pompe doseuse avec rapport de mélange 1:1
- Plaque de fixation embout mélangeur orientable
- Support avec centrage cuvette en aluminium anodisé
- Étriers de support récipients réglables (optionnels)
- **Raccords rapides** des récipients **munis d'une vanne d'arrêt de l'écoulement**
- Configuration directe avec tous les formats d'**elite double** (1 kg et 5 kg)
- Filtres à baïonnette pour la purge d'air des bidons des récipients
- Récipients optionnels transparents d'une capacité de 2 kg



■ **FLUX ORIENTABLE:**

le dispositif orientable facilite l'opération d'insertion de l'embout mélangeur et la distribution homogène du silicone à l'intérieur de la cuvette.



■ **CENTRAGE CUVETTE:**

le support en aluminium facilite le bon positionnement du moufle sur le plan de travail.



■ **RECIPIENTS OPTIONNELS:**

les récipients supplémentaires fournis comme accessoire permettent l'utilisation des tous silicones fluides présents sur le marché.

FAITS SAILLANTS

doublemix



■ **RACCORDS RAPIDES:**

le système de fixation avec vanne d'arrêt de l'écoulement permet à l'utilisateur de ne pas confondre la base et le catalyseur, en évitant la formation des bulles d'air dans le circuit.



■ **DESIGN:**

le design de dernière génération avec sa structure à étriers réglables est compatible avec tous les formats d'élite double.



■ **BOUTON D'ACTIONNEMENT:**

la position centrale du bouton d'actionnement facilite les opérations de remplissage de la cuvette.

ZHERMACK recommande l'utilisation du nouveau mélangeur avec la ligne *elite double extra fast*.





ELITE DOUBLE 16 EXTRA FAST

ELITE DOUBLE 22 EXTRA FAST

ELITE DOUBLE 32 EXTRA FAST

doublemix

TECHNIQUE EN ÉVIDENCE

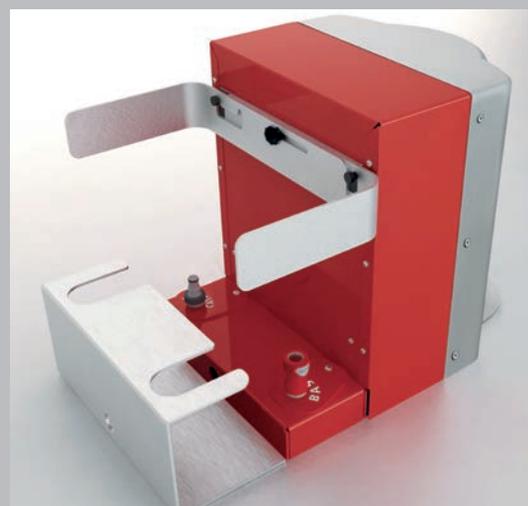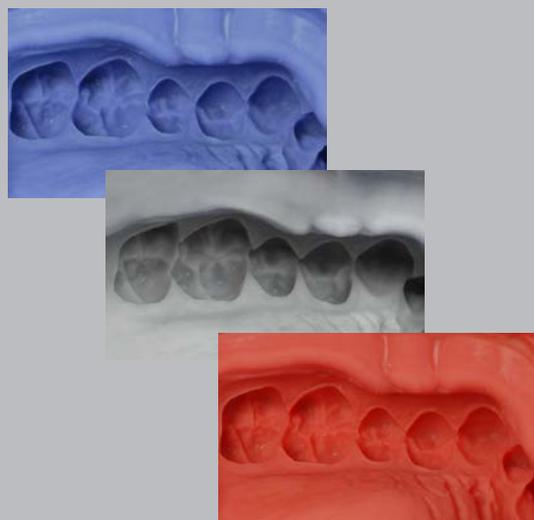

■ **HOMOGENÉITÉ ET RÉPÉTITION:** **DOUBLEMIX** emploie une pompe doseuse qui garantit le mélange homogène du silicone afin d'obtenir jours des duplications de qualité. Au contraire du mélange effectué manuellement, doublemix évite toute formation des bulles d'air.

■ **FLEXIBILITÉ:** La fixation rapide de tous les formats d'*elite double* élimine la phase de dosage manuel par l'utilisateur en garantissant le maximum de précision et un rapport correct de mélange 1:1.

■ **RAPIDITÉ ET GAIN DE TEMPS:** L'utilisation de **DOUBLEMIX** associée à *elite double extra fast* permet d'effectuer la duplication d'un modèle en presque plus de 6 minutes.
1:30 min. temps de mélange.
5:00 min. temps de durcissement.

Zhermack
Dental

doublemix



Modèles

Code	Modèle	Mésures externes	Poids	Tension d'alimentation	Puissance absorbée
C309020	Doublemix - 230 V	L 360 - P 265 - H 330 mm	17 kg	230 V ±10% 50 - 60 Hz	260 Watt
C309021	Doublemix - 115 V	L 360 - P 265 - H 330 mm	17 kg	115 V ±10% 50 - 60 Hz	260 Watt
C309022	Doublemix - 230 V - UK	L 360 - P 265 - H 330 mm	17 kg	230 V ±10% 50 - 60 Hz	260 Watt

Accessoires

XR0240030	Kit Étriers + support arrière bidons 5 kg elite double	XR0240070	Récepteur 2 kg transparent avec raccord rapide catalyst femelle
XR0240010	Bouchon avec raccord rapide base mâle pour bidons elite double de 5 kg	XR0240060	Récepteur 2 kg transparent avec raccord rapide base mâle
XR0240020	Bouchon avec raccord rapide catalyseur femelle pour bidons elite double de 5 kg		

Silicones de duplication

C400848	Elite double 16 Shore A extra fast 5 kg + 5 kg	C400853	Elite double 32 Shore A extra fast 5 kg + 5 kg
C400838	Elite double 22 Shore A extra fast 1 kg + 1 kg	C400530	Tensilab flac. 120 ml - solution tensio-active à base d'alcool
C400849	Elite double 22 Shore A extra fast 5 kg + 5 kg		

Équipement de série

Code	Modèle
XR0240040	Adaptateur avec raccord rapide base mâle pour flacon elite double 1 kg
XR0240050	Adaptateur avec raccord rapide catalyst femelle pour flacon elite double 1 kg
C202070	Embouts de mélange jaunes 48 pièces
XR0240150	Filtre à baïonnette pour la purge d'air
XR0240140	Plan de travail support avec centrage moufle
XH9900010	Clé hexagonale pour l'entretien du bloc de mélange

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH Deutschland
 Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
 F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
 info@zhermack.de
 www.zhermack.de

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
 ul. Augustówka 14
 02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
 +48 22 292 71 17
 F +48 22 642 07 14
 biuro@zhermack.com
 www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
 P.O. Box 4195, River Edge
 New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
 +1 (732) 389 8540
 F +1 (732) 389 8543
 info@zhermackusa.com
 www.zhermackusa.com