

# ***modulmix***



**Equipment**  
Automatic mixing unit

**Zhermack**   
Dental



*Design  
Modulaire et  
Compact*

# *modulmix*

**ZHERMACK** leader mondial pour la production des matériaux d’empreinte et d’appareils pour usage dentaire, présente **MODULMIX**, le nouveau mélangeur automatique de **SILICONES-A** avec rapport de mélange 5:1.

Des prestations d’un très haut niveau associées à un design modulaire permettent à **MODULMIX** de s’intégrer parfaitement dans tout type d’environnement de travail.

La flexibilité est la caractéristique principale de **MODULMIX**. Choisissez la version qui vous convient et testez les prestations uniques de cet innovateur mélangeur automatique.

**MODULMIX**, le mélangeur automatique pour silicones A en rapport 5:1, c'est le résultat de la recherche avancée Zhermack pour obtenir des performances d'un très haut niveau, une qualité et une fonctionnalité optimales.



# modulmix

## APPLICATIONS



■ Remplissage haute vitesse du porte-empainte avec heavy body ou putty dans la technique d'empainte heavy/putty light.



■ Remplissage basse vitesse du porte-empainte et de la seringue avec produit medium body dans la technique d'empainte monophasé.



■ Remplissage haute vitesse du porte-empainte avec alginate alternatif pour l'empainte antagoniste dans la technique d'empainte simultanée.

**2 vitesses de distribution facilement modulables  
par une simple pression du doigt sur le bouton à  
double fonction.**

# modulmix

## CARACTÉRISTIQUES

- Possibilité de connecter plusieurs machines en ligne
- Double vitesse de distribution:
  - basse vitesse: 70\* ml/min
  - haute vitesse: 155\* ml/min
- Avancement et recul motorisés des pistons pour accélérer le changement de la cartouche (3 sec max)
- Bandelettes latérales personnalisables pour assortir la machine aux couleurs du cabinet
- Design ergonomique
- Bouton de distribution pour droits et gauchers
- Indicateur du niveau de silicone qui reste dans la cartouche
- Pistons avec dispositif protège-doigts pour la garantie d'un standard de sécurité maximum
- Montage mural ou sur table
- Minuterie digitale en dotation
- Disponible en versions 230 V et 115 V
- Compatible avec tous les systèmes 5:1 actuellement disponibles sur le marché





■ Le design modulaire breveté de **MODULMIX** a été spécialement étudié pour les cabinets dentaires qui doivent utiliser plusieurs matériaux d'empreinte au même moment.



■ Les bandelettes personnalisables de 6 couleurs différentes offrent la possibilité d'uniformiser la machine à la décoration du cabinet.



■ En appuyant sur un seul bouton, on peut sélectionner deux vitesses et moduler la distribution du matériau selon ses besoins. À vitesse élevée, on peut remplir un porte-empreinte dans des temps record (155ml/min\*). La basse vitesse (70ml/min\*), au contraire, est conseillée pour le remplissage des seringues pour élastomères.

# modulmix

## EN ÉVIDENCE



■ Le battant de sécurité transparent permet de visualiser le type de produit utilisé, les temps de prise et d'élaboration indiqués sur la cartouche et le niveau du produit aussi.



■ L'avancement et le recul motorisés des pistons est très rapide. En actionnant le bouton, en 3 secondes seulement, on peut reculer les pistons et changer de cartouche.



■ Le nouveau embout dynamique-statique breveté par Zhermack offre une homogénéité du mélange parfaite.

# modulmix

## PERSONNALISATION

Projeté pour tous les styles de travail, en version simple ou modulaire, murale ou sur table, **MODULMIX** s'inspire aux exigences du professionnel.



Configuration simple sur table



Configuration modulaire sur table




Configuration simple murale




Configuration modulaire murale

Le mélange automatique à double vitesse associé à l'embout de mélange innovateur dynamique-statique\* garantissent une homogénéité de mélange maximum (sans bulles d'air) en maintenant au même moment la réactivité du produit intacte.

## TECHNIQUE MISE EN ÉVIDENCE

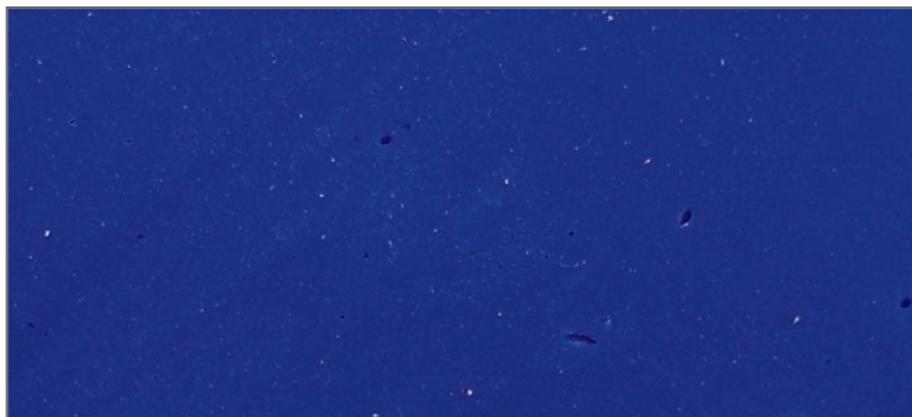

*Agrandissement d'un mélange automatique avec heavy body en cartouche économique 380ml standard*

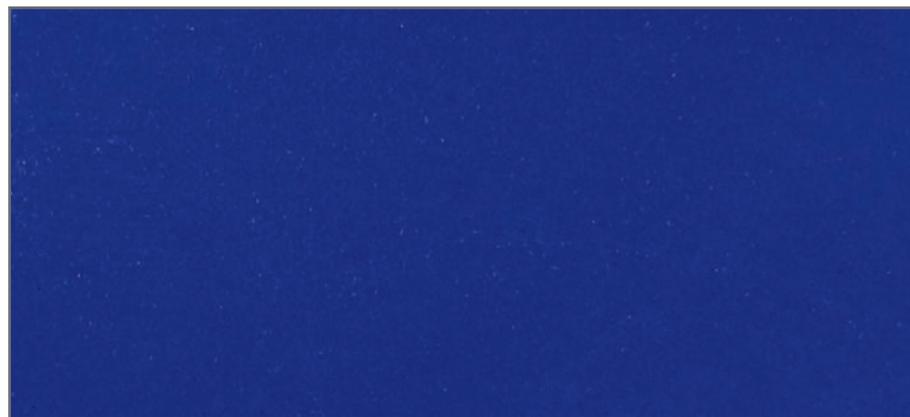

*Agrandissement d'un mélange avec MODULMIX et HYDRORISE heavy body en cartouche 380 ml du nouveau système Zhermack*

- Avec **MODULMIX** on réduit considérablement la phase de mélange ce qui a l'avantage d'augmenter le temps de fabrication du produit
- Par rapport au mélange manuel, le mélange automatique du système Zhermack est plus facile, constant et de meilleure qualité

- En utilisant le Silicone-A en cartouche économique de 380 ml le coût de l'empreinte est réduit d'environ 50% par rapport à l'utilisation de ce même produit dans des conditionnements standard en cartouches de 50 ml
- La distribution automatique évite à l'utilisateur l'effort de mélanger et de doser le produit sur le porte-empreinte

# modulmix

F142013 - 2015-12



## Modèles

Code	Modèle	Dimensions	Poids	Tension	Puissance absorbée
C309030	MÉLANGEUR AUTOMATIQUE MODULMIX 230 V	L224 / P372 / H320 mm	10 kg	230V ± 10% 50/60 Hz	160 W

## Équipement de série- Modulmix

Bandelettes latérales couleur gris
Base support
Minuterie digitale
Alimentateur avec câble d'alimentation

## Accessories

XR0240520	Kit de montage mural
XR0240530	Kit de montage mural pour deux Modulmix
XR0240500	Support de table pour deux modulmix

Les produits suivants sont des dispositifs Médicaux pour soins dentaires réservés aux Professionnels de Santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation.  
**MODULMIX ET ACCESSOIRES** - indication : Mélangeur automatique de silicones-A avec rapport de mélange 5:1 ; classe : I ; fabricant : Zhermack. **HYDRORISE** - indication : Silicone par addition pour empreintes dentaires ; classe : I ; fabricant : Zhermack

## BRANCHES

**GERMANY**  
**Zhermack GmbH Deutschland**  
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0  
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11  
info@zhermack.de  
www.zhermack.de

**POLAND**  
**Zhermapol Sp. z o.o.**  
ul. Augustówka 14  
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72  
+48 22 292 71 17  
F +48 22 642 07 14  
biuro@zhermack.com  
www.zhermapol.pl

**USA**  
**Zhermack Inc.**  
P.O. Box 4195, River Edge  
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206  
+1 (732) 389 8540  
F +1 (732) 389 8543  
info@zhermackusa.com  
www.zhermackusa.com

**Zhermack S.p.A.** | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY  
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

**Zhermack**