hurrimix²





Hurrimix² una macchina

della quale non puoi fare a meno



Incrementare l'efficienza dello studio significa aumentare il **grado di soddisfazione** dei pazienti.

L'impronta è fondamentale che abbia tutte le informazioni, precise e chiare, necessarie per trattare al meglio ciascun caso clinico. Per questo un buon materiale è il presupposto, ma una miscelazione di qualità è molto spesso la discriminante tra una buona e una cattiva impronta.

Miscelare bene serve per poter essere tranquilli che la prima impronta sarà anche quella definitiva.

Miscelare velocemente serve per poter approcciare il paziente con il giusto tempo a disposizione, non sprecando questa risorsa preziosa per i professionisti dello studio ed i pazienti stessi.

Hurrimix² è la soluzione di Zhermack che potenzia la qualità della miscelazione e dell'impronta: una macchina che quando si prova ad utilizzare si capisce di non poterne più fare a meno.



costante veloce affidabile efficiente

Qualità di

miscelazione al quadrato



Hurrimix² è stata progettata per fare in modo che **la qualità della miscelazione sia elevata ed ottimale**. Per questo ogni dettaglio concorre a realizzare questo scopo:

- La rotazione deve essere il più possibile costante e veloce: un encoder elettronico è usato per controllare la velocità di rotazione del materiale in ogni momento
- La fase di frenata è altrettanto importante: controllare la decelerazione aumenta la qualità della miscelazione in quanto riduce la formazione di bolle
- La possibilità di avere fino a 20 programmi ottimizzati garantisce di poter avere il giusto mix di variabili per la miscelazione


Con Hurrimix² la miscelazione diventa:

- Veloce: c'è più tempo da dedicare al paziente per prendere l'impronta (da 6 a 10 secondi di miscelazione*)
- Costante nella qualità e non dipendente da chi effettua l'operazione: tempi di lavorazione certi e migliore sincronia tra il dentista e l'assistente

COSA CAMBIA CON HURRIMIX²?

Rispetto ad un'operazione manuale Hurrimix² migliora la qualità della miscelazione, riducendo notevolmente la presenza di bolle dentro al materiale da usare per l'impronta.



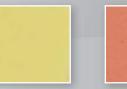





costante veloce affidabile efficiente

Dopo l'impronta, che fare?

Alginati e Gessi

applicazioni diverse, stessa macchina!

Molte volte emerge la necessità di avere disponibile il modello direttamente in studio poco tempo dopo la presa d'impronta. Con Hurrimix² questo è possibile: le tipologie di gessi Zhermack sono miscelabili in pochi secondi.

- · si può colare direttamente il modello nella clinica, compattando i tempi di lavorazione del caso
- si possono **risparmiare tempi e costi**



Perché è importante che la miscelazione sia di qualità?

Miscelare bene serve per poter **registrare tutte le informazioni** che devono essere rilevate in un'impronta sfruttando le caratteristiche che un materiale offre in termini di **elasticità**, **precisione**,

resistenza.

Molto spesso la presenza di bolle non permette di riprodurre i dettagli correttamente e modifica le caratteristiche meccaniche del materiale.

Cosa significa concretamente?

Il caso clinico, con un'impronta ben fatta, risulta più **semplice da studiare** e vengono **drasticamente ridotti gli errori di comunicazione** con il proprio odontotecnico di fiducia.

Non si deve richiedere al paziente di ritornare o non si deve rifare l'impronta. Questo significa rendere i pazienti più soddisfatti e contenti.

Si riduce inoltre lo spreco: meno materiale sprecato, meno tempo sprecato dai professionisti e dal paziente, più efficienza con l'odontotecnico. **Meno spreco significa maggior rendimento**.

Parola d'ordine:

semplificare!



Hurrimix² si adatta alle esigenze dei professionisti, **semplificando**.

10 programmi selezionabili in un click, per adattarsi alle esigenze di utilizzo di ogni professionista: **tempi e caratteristiche di miscelazione ottimizzate** per ottenere la giusta qualità.


Di questi 10 programmi* 7 sono **preim- postati** su prodotti Zhermack e 3 completamente liberi e **personalizzabili** permettendo di adattare le funzionalità di
Hurrimix² a materiali diversi.

Hurrimix² è dotata di una serie di accessori pensati per aiutare il professionista durante il processo di miscelazione:

- **Bottiglia dosatrice**: la giusta quantità di acqua con la giusta quantità di polvere rendono il prodotto correttamente preparato
- Contenitori dedicati (diversi per alginati e gessi) con profilo curvo che si accoppia al profilo della spatola (minore spreco e maggiore facilità nella raccolta del materiale)



ACCESSORI SU MISURA

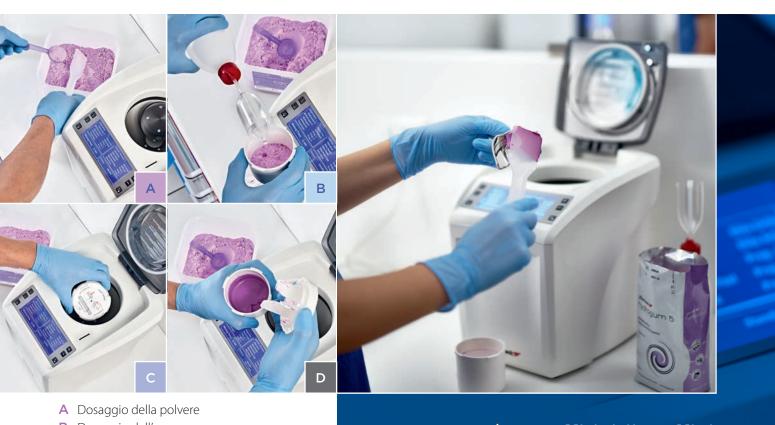

- B Dosaggio dell'acqua
- **C** Miscelazione
- D Prodotto pronto all'uso

costante veloce affidabile efficiente

Pensata per lo studio, in ogni particolare




COMPONENTI CRITICI STUDIATI PER GARANTIRE UNA LUNGA **DURATA NEL TEMPO:**

- A Ingranaggi in acciaio e bronzo per una durata superiore rispetto a quelli in plastica
- B Hurrimix² ti ricorda quando è ora di effettuare la manutenzione preventiva 🗲 in maniera tale da diminuire i rischi operativi
- C Chiusura di sicurezza del coperchio per

evitare incidenti pericolosi

GARANZIA ESTESA A 4 ANNI O A 4000 CICLI

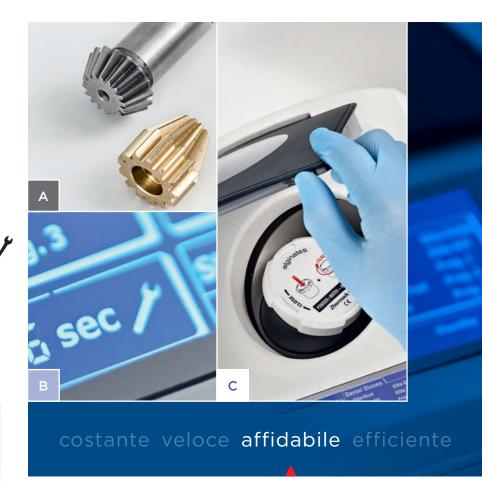

Caratteristiche

tecniche **DISINFEZIONE: NO PROBLEM!** Le caratteristiche di resistenza agli agenti chimici del PBT permettono una disinfezione della macchina senza problemi* MATERIALE AUTOESTINGUENTE (UL 94-CLASS.VO)

Il materiale del guscio esterno è un tecnopolimero

(Polibutilentereftalato - PBT)



SICURO E DUREVOLE

Le proprietà meccaniche del materiale assicurano la necessaria resistenza agli urti della macchina durante il normale utilizzo nello studio.

Dati tecnici

Codice Modello	Dimensione	Peso	Tensione di rete	Potenza assorbita max
C305140 Hurrimix ² 230 V	Altezza 31 cm Larghezza 27 cm Profondità 32 cm	21 kg	230 V 50/60 Hz	550 Va (W)
C305141 Hurrimix ² 115 V			115 V 50/60 Hz	

Accessori

Codice	Accessori	
XR0250820	Kit spatole di raccolta	
XR0250830	Bastoncino pre-mix	

XR0250802	Tazza per miscelazione alginati 2 pz
XR0250804	Tazza per miscelazione gessi Zhermack 2 pz
XR0250840	Bottiglia dosaggio acqua con misurino

Prodotti correlati

Codice	Descrizione
C302120	Hydrocolor 5, busta da 453 g
C302070	Hydrogum 5, busta da 453 g
C302025	Hydrogum, busta da 500 g
C302240	Tropicalgin, busta da 453 g
C302086	Phase Plus, busta da 453 g
C302145	Orthoprint, busta da 500 g
C302205	Neocolloid, busta da 500 g

C300900	Set misurini Hydrogum 5 / Hydrocolor 5
C300910	Set misurini alginati, eccetto Hydrogum 5 / Hydrocolor 5
C300960	Busta minigrip conservazione impronta, 100 pz.

costante veloce affidabile efficiente

Fulfilling your needs

BRANCHES

GERMANY

Zhermack GmbH Deutschland

Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0 F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11 info@zhermack.de www.zhermack.de POLAND

Zhermapol Sp. z o.o. ul. Augustówka 14

02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72 +48 22 292 71 17 F +48 22 642 07 14 biuro@zhermack.com

biuro@zhermack.com www.zhermapol.pl USA

Zhermack Inc.

P.O. Box 4195, River Edge New Jersey 07661 - 4195 T+1 (877) 819 6206 +1 (732) 389 8540 F+1 (732) 389 8543 info@zhermackusa.com www.zhermackusa.com

