


elite HD+

HYDROPHILIC

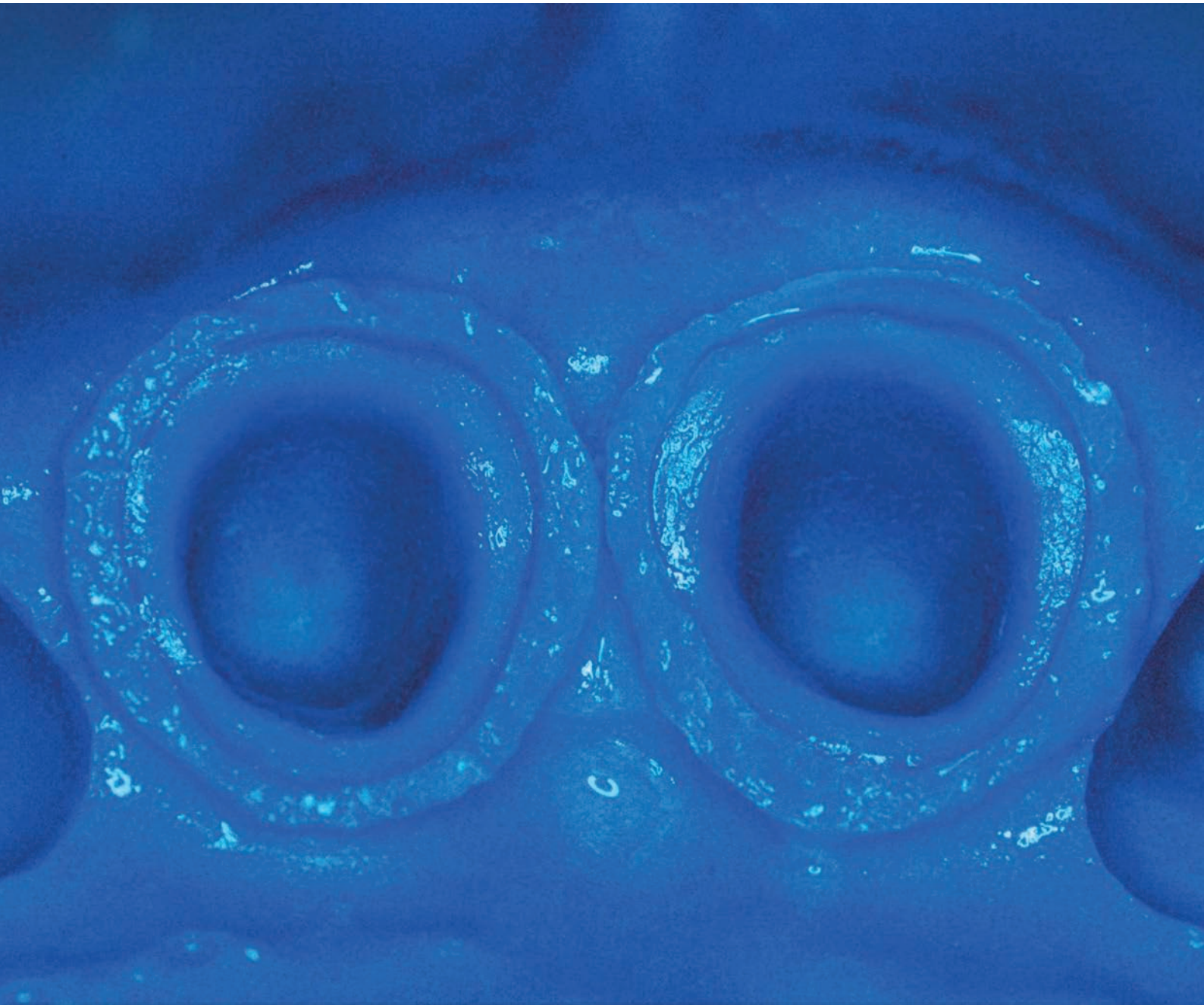

Clinical

A-Silicone Impression material

Zhermack 
Dental

elite HD+

Kiedy hydrofilność staje się zasadą.

Firma **ZHERMACK** przedstawia **ELITE HD+**.

Wyjątkowy materiał wyciskowy, który łączy w sobie innowacyjne efekty **nano-technologii i hydrofilności**, co gwarantuje osiągnięcie znakomych rezultatów w każdych warunkach klinicznych.



+ HYDROKOMPATYBILNY

› **Natychmiastowy efekt hydrofilności** już po upływie 2 sekund

+ PŁYNNY

› **Dodanie nanocząstek** zwiększa płynność materiału wyciskowego w kieszonkach dziąsłowych

+ PRECYZYJNY

› **Synergiczne działanie** natychmiastowego efektu hydrofilii i nanotechnologii umożliwia precyzyjne odtworzenie wszelkiego rodzaju szczegółów

+ WSZECHSTRONNY

› **Szeroka gama** mas o różnej lepkości i różnym czasie wiązania przeznaczonych dla każdej techniki pobierania wycisku

+ PRAKTYCZNY

› Nowy system 5:1 przeznaczony do automatycznego mieszania, nie wymaga użycia materiałów preparacyjnych, wyposażony w system szybkiego **montażu końcówki** mieszającej

+ PEŁNA GAMA PRODUKTÓW

› **Szeroka gama** produktów zaspokaja wszystkie wymagania

elite HD+


Hydrofilność i natychmiastowy efekt sy

EFEKT HYDROFILNOŚCI


NATYCHMIASTOWA HYDROFILNOŚĆ

Połączenie wstępnie obrobionych nanocząsteczek wypełniacza ze środkiem powierzchniowo-czynnym sprawia, że **Elite HD+** wykazuje efekt hydrofilności już w 2 sekundy od aplikacji masy do kieszonki dziąsłowej.

TEST KROPLI WODY

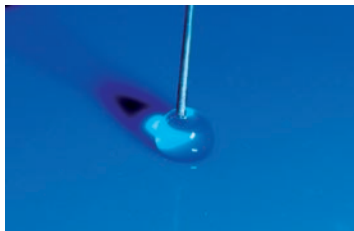

TRADYCYJNY SILIKON

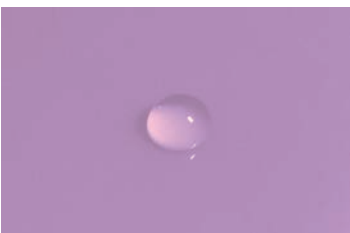


Kropla po upływie 2 sekund

ELITE HD+



Kropla po upływie 2 sekund

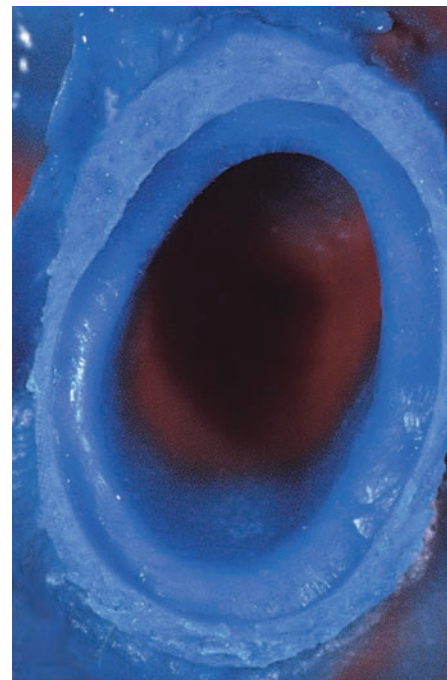

ELITE HD+ light

PERFEKCYJNE ODWZOROWANIE


Natychmiastowy efekt hydrofilności pozwala na szybkie odwzorowanie każdego szczegółu znacznie redukując ryzyko powstawania pęcherzy.

nanotechnologia dają
synergii.


KORZYŚCI NANOTECHNOLOGII

IDEALNA PŁYNNOŚĆ

Zastosowanie nanocząsteczek (20 nanometrów) poddawanych obróbce na poziomie molekularnym w połączeniu ze środkami powierzchniowo-czynnymi umożliwia uzyskanie przez **ELITE HD+** idealnej płynności w kieszonek dziąsłowych.

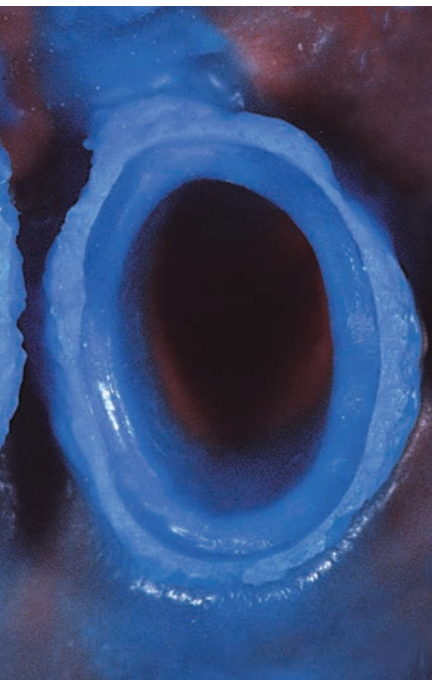

normal setting

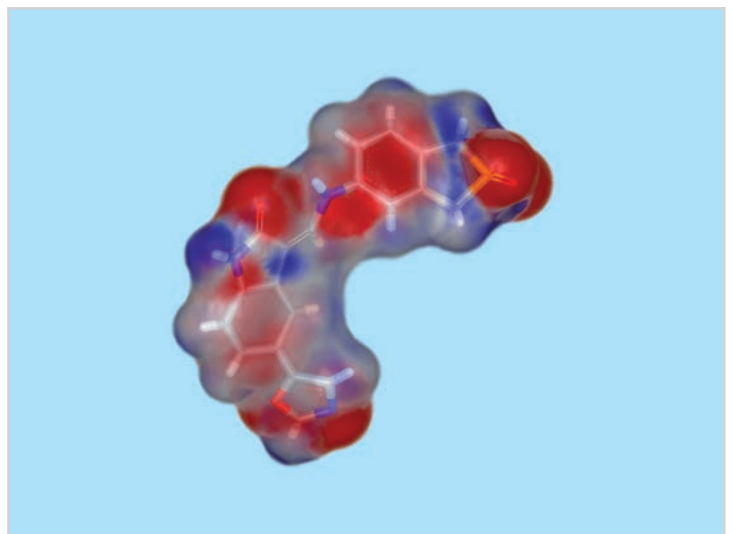

Masa wyciskowa w powiększeniu pod skaningowym mikroskopem elektronowym SEM

TIKSOTROPOWOŚĆ

Efekt nanotechnologii uwidacznia się również w przypadku, kiedy materiał podlega naciskowi podczas pobierania wycisku. Dzięki temu **ELITE HD+** znacznie zwiększa swoją płynność i może dotrzeć do miejsc trudno dostępnych dla dotychczas stosowanych mas.

elite HD+

Techniki pobierania wycisków.

PRODUKT	ZALECANA TECHNIKA	ZALECANA KOMBINACJA
ELITE HD+ Putty Soft Fast ELITE HD+ Maxi Putty Soft Fast	Wycisk dwuwarstwowy dwuczasyowy	ELITE HD+ Light Body Fast ELITE HD+ Super Light Body Fast
ELITE HD+ Putty Soft Fast ELITE HD+ Maxi Putty Soft Fast	Wycisk dwuwarstwowy jednoczasowy	ELITE HD+ Light Body Fast
ELITE HD+ Putty Soft Normal ELITE HD+ Maxi Putty Soft Normal	Wycisk dwuwarstwowy jednoczasowy	ELITE HD+ Light Body Normal ELITE HD+ Regular Body Normal
ELITE HD+ Tray Material Heavy Body ELITE HD+ Maxi Tray Material Heavy Body	Wycisk dwuwarstwowy jednoczasowy	ELITE HD+ Light Body Fast ELITE HD+ Light Body Normal ELITE HD+ Regular Body Normal
ELITE HD+ Monophase Medium Body ELITE HD+ Maxi Monophase Medium Body	Wycisk jednofazowy (jednowarstwowy)	

Opakowania handlowe

C203050 ELITE HD+ SUPER LIGHT BODY FAST SETTING	2 naboje (baza+katalizator) po 50 ml + 12 końcówek mieszających
C203146 ELITE HD+ SUPER LIGHT BODY FAST SETTING	10 naboji (baza + katalizator) po 50 ml
C203040 ELITE HD+ LIGHT BODY FAST SETTING	2 naboje (baza+katalizator) po 50 ml + 12 końcówek mieszających i
C203142 ELITE HD+ LIGHT BODY FAST SETTING	10 naboji (baza + katalizator) po 50 ml
C203030 ELITE HD+ LIGHT BODY NORMAL SETTING	2 naboje (baza+katalizator) po 50 ml + 12 końcówek mieszających
C203140 ELITE HD+ LIGHT BODY NORMAL SETTING	10 naboji (baza + katalizator) po 50 ml
C203035 ELITE HD+ LIGHT BODY NORMAL SETTING	2 tubki (baza+katalizator) po 90 ml
C203020 ELITE HD+ REGULAR BODY NORMAL SETTING	2 naboje (baza+katalizator) po 50 ml + 12 końcówek mieszających
C203144 ELITE HD+ REGULAR BODY NORMAL SETTING	10 naboji (baza + katalizator) po 50 ml
C203025 ELITE HD+ REGULAR BODY NORMAL SETTING	2 tubki (baza+katalizator) po 90 ml
C202032 ELITE HD+ TRAY MATERIAL (Heavy Body)	2 naboje (baza+katalizator) po 50 ml + 6 końcówek mieszających żółtych
C202062 ELITE HD+ TRAY MATERIAL (Heavy Body)	20 naboje (baza+katalizator) po 50 ml
C202320 ELITE HD+ MAXI TRAY MATERIAL (Heavy Body)	2 naboje (baza + katalizator) o poj. 380 ml + 15 końcówek mieszających Dynamic + 2 pierścienie dociskowe
C202330 ELITE HD+ MAXI TRAY MATERIAL (Heavy Body) ECO	6 naboje (baza + katalizator) o poj. 380 ml + 2 pierścienie dociskowe
C202020 ELITE HD+ MONOPHASE (Medium Body)	2 naboje (baza+katalizator) po 50 ml + 12 końcówek mieszających
C202300 ELITE HD+ MAXI MONOPHASE (Medium Body)	2 naboje (baza + katalizator) o poj. 380 ml + 15 końcówek mieszających Dynamic + 2 pierścienie dociskowe + 1 strzykawka do silikonu + 15 końcówek wewnętrznych (oral tipsów)
C202310 ELITE HD+ MAXI MONOPHASE (Medium Body) ECO	6 naboji (baza + katalizator) o poj. 380 ml + 2 pierścienie dociskowe + 3 strzykawki do silikonu + 45 szt. końcówek wewnętrznych (oral tipsów)
C203000 ELITE HD+ PUTTY NORMAL SETTING	1 pojemnik baza po 250 ml + 1 pojemnik katalizator po 250 ml
C203002 ELITE HD+ PUTTY NORMAL SETTING ECO	2 pojemniki baza po 450 ml + 2 pojemniki katalizator po 450 ml
C203010 ELITE HD+ PUTTY FAST SETTING	1 pojemnik baza po 250 ml + 1 pojemnik katalizator po 250 ml
C203012 ELITE HD+ PUTTY FAST SETTING ECO	2 pojemniki baza po 450 ml + 2 pojemniki katalizator po 450 ml
C202340 ELITE HD+ MAXI PUTTY NORMAL SETTING	2 naboje (baza + katalizator) o poj. 380 ml + 2 pierścienie dociskowe + 15 szt. końcówek wewnętrznych (oral tipsów)
C202350 ELITE HD+ MAXI PUTTY NORMAL SETTING ECO	6 naboji (baza + katalizator) o poj. 380 ml + 2 pierścienie dociskowe
C202360 ELITE HD+ MAXI PUTTY FAST SETTING	2 naboje (baza + katalizator) o poj. 380 ml + 2 pierścienie dociskowe + 15 szt. końcówek wewnętrznych (oral tipsów)
C202370 ELITE HD+ MAXI PUTTY FAST SETTING ECO	6 naboji (baza + katalizator) o poj. 380 ml + 2 pierścienie dociskowe

elite HD+

**nie straszne wilgotne środowisko
jamy ustnej!**

elite HD+

HYDROPHILIC



F230022 - 18-05

Kleje

C700025 UNIVERSAL TRAY ADHESIVE	Klej do standardowych metalowych łyżek wyciskowych, 10 ml
C700080 ELITE IPERLINK LCT	Klej do łyżek światłoutwardzalnych: 1 Prep, 5ml + 1 Link, 5 ml
C700070 ELITE IPERLINK SCT	Klej do łyżek akrylowych (z samopolimerów) lub plastikowych, 5 ml

Akcesoria

C202070	48 końcówek mieszających
C202090	48 końcówek wewnętrznych (oral tipsów)
C202080	48 końcówek mieszających żółtych
C202100	1 pistolet D2 - 1:1
C207203	1 tłok do pistoletu D2 - 1:1
C205530	50 końcówek Dynamic
C205540	2 pierścienie mocujące
C207200	Szpatułka (nożyk) do silikonów
C207202	Podkładki do mieszania mas: 12 arkuszy
HI-TRAY	Dostępna szeroka gama łyżek wyciskowych (metalowych i z tworzywa sztucznego)

Zestawy

C203100	1 Putty Normal 250 ml + 250 ml + 1 Light Normal 50 ml + 1 Regular Normal 50 ml + 1 pistolet D2 + 12 końcówek mieszających + 6 końcówek wewnętrznych (oral tipsów)
C203120	1 Putty Fast 250 ml + 250 ml + 1 Light Fast 50 ml + 1 Super Light Fast 50 ml + 1 pistolet D2 + 12 końcówek mieszających + 6 końcówek wewnętrznych (oral tipsów)

Dodatkowe wyposażenie

C309030	Mieszalnik automatyczny Modulmix (230 V)
---------	--

Dodatkowe

XR0240550	Oslony w kolorze błękitnym	XR0240520	Komplet mocowania do ściany dla 1 Modulmixów
XR0240551	Oslony w kolorze pomarańczowym	XR0240530	Komplet mocowania do ściany dla 2 Modulmixów
XR0240552	Oslony w kolorze niebieskim	XR0240510	Podstawa do montażu na stole
XR0240553	Oslony w kolorze zielonym	XR0240500	Podstawa do montażu na stole dwóch Modulmixów
XR0240554	Oslony w kolorze białym	XR0240630	Zasilacz (230 V)
XR0240555	Oslony w kolorze szary		

BRANCHES

GERMANY

Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND

Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
+48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA

Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com