

zeta hygiene



FEEL SAFE

Решения по обеспечению гигиены

Zhermack 
Dental

Zeta Hygiene, feel safe

Надлежащее выполнение в стоматологической поликлинике и зуботехнической лаборатории процедур чистки, дезинфекции и стерилизации является гарантией защиты от инфекций.

Для защиты пациентов и персонала стоматологической поликлиники от опасности перекрестного инфицирования необходимо не только строго соблюдать соответствующие процедуры, но и использовать **эффективные** и **безопасные** продукты, обладающие **широким спектром действия**.

Быстродействие, простота использования и высокая совместимость с различными материалами превращают Zeta Hygiene в идеальное решение для наиболее требовательных профессионалов, гарантирующее высокую степень безопасности и защиты как для пользователя, так и для пациента.

Zeta Hygiene представляет собой полную линию продуктов для чистки, дезинфекции и стерилизации,

не содержащих токсичных веществ, таких как фенолы и альдегиды, и не оказывающих повреждающего действия на инструменты и рабочие поверхности стоматологического кабинета и зуботехнической лаборатории. В состав линии дезинфектантов входят инновационные средства, изготовленные при соблюдении самых жестких стандартов производства и проверенные и протестированные согласно самым последним европейским нормативам.

Zeta Hygiene предлагает **эффективные решения**, обеспечивающие **надлежащий уровень защиты**.

Zhermack берет на себя заботу о вашей безопасности.

решения по обеспечению гигиены



хирургические и вращающиеся инструменты

Zeta 1 Ultra

стр. 7

Zeta 2 Enzyme

стр. 8

Zeta 2 Sporex

стр. 9



поверхности

Zeta 3 Foam

стр. 11



специальное применение

Zeta 5 Power Act

стр. 13

хирургические и врачающиеся инструменты



Zeta 1 Ultra



хирургические и врачающиеся инструменты

Концентрированное жидкое дезинфицирующее и чистящее средство широкого спектра действия, подходит для всех хирургических и врачающихся стоматологических инструментов.

Действующие вещества: Триамин и ЧАС

РАСТВОР 2/3% для ПОЛНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

РАСТВОР 1% для БЫСТРОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ▶ Высокий уровень защиты: широкий спектр действия
- ▶ Эффективен также при наличии органических загрязнений
- ▶ Высокоэффективная формула, концентрат
- ▶ Высокий уровень совместимости с материалами
- ▶ Лёгкость использования: короткое время действия и простота дозирования благодаря дозатору, встроенному во флакон
- ▶ Безопасность для пользователя: отсутствие альдегидов и фенолов

Способ применения

**ПОЛНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ, совмещённая с ПСО
2%-ный раствор** (обычная ванночка).

Разведите 20 мл концентрата в воде, чтобы получить 1 литр раствора. Погрузите инструменты в обычную ванночку с раствором на 120 минут.

3%-ный раствор (ультразвуковая ванна).

Разведите 30 мл концентрата в воде, чтобы получить 1 литр раствора. Погрузите инструменты в ультразвуковую ванну с раствором на 30 минут.

**В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
КАЖДЫЙ ЛИТР ZETA 1 ULTRA ПОЗВОЛЯЕТ ПРИГОТОВИТЬ
50 ИЛИ 33 Л ГОТОВОГО РАСТВОРА.**

Спектр действия



ПОЛНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

2%-НЫЙ РАСТВОР (ОБЫЧНАЯ ВАННОЧКА)

3%-НЫЙ РАСТВОР (УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА)

Бактерицидное (включая Туберкулоцидное), Фунгицидное и Вирулицидное действие

БЫСТРАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1%-НЫЙ РАСТВОР (ОБЫЧНАЯ или УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА)

Бактерицидное (исключая Туберкулоцидное), Фунгицидное и Вирулицидное действие

Zeta 2 Enzyme



хирургические и врачающиеся инструменты

Концентрированное трехэнзимное порошковое моющеее и дезинфицирующее средство с широким спектром действия. Специальное средство, предназначенное для обработки обычно используемых стоматологических инструментов, хирургических и врачающихся, перед их стерилизацией.

Действующие вещества: Надуксусная кислота, перекись водорода, энзимы

РАСТВОР 2% ДЛЯ ПОЛНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ▶ Высокий уровень защиты: оказывает бактерицидное, фунгицидное, туберкулоцидное и вирусицидное действие
- ▶ Выполняет глубокую чистку также внутри микроструктур боров и инструментов
- ▶ Усиленное очищающее действие благодаря содержащимся в составе продукта энзимам - амилазе, протеазе, липазе
- ▶ Безопасность для пользователя: не содержит альдегиды и фенолы

Способ применения

Раствор 2 %: отмерьте 20 г (2 мерника) **Zeta 2 Enzyme** на каждый литр воды (при температуре жидкости не менее 20°C) и размешайте, чтобы способствовать растворению порошка. Подождите 15 минут. Погрузите инструменты в раствор на 60 минут. Приготовленный раствор для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, медицинских изделий можно использовать многократно в течение рабочей смены, если его внешний вид не изменился.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОЙ УПАКОВКИ ZETA 2 ENZYME ПОЛУЧАЕТСЯ 60 ЛИТРОВ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА

Спектр действия

бактерицидное
фунгицидное
туберкулоцидное
вирусицидное



Zeta 2 Sporex



хирургические и врачающиеся инструменты

Средство для холодной стерилизации и дезинфектант высокого уровня в виде порошка. Для стоматологических инструментов, особенно тех, которые не подлежат стерилизации в автоклаве.

Действующее вещество: Надуксусная кислота

РАСТВОР 2% ДЛЯ ПОЛНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ / СТЕРИЛИЗАЦИИ



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ▶ Высокий уровень защиты: оказывает бактерицидное, противодрожжевое, туберкулоцидное, вирулицидное и спорицидное действие
- ▶ Обеспечивает выполнение холодной химической стерилизации
- ▶ Безопасность для пользователя: не содержит альдегидов; образование надуксусной кислоты только при растворении исключает проблемы, связанные с использованием свободной надуксусной кислоты

Способ применения

Раствор 2 %: отмерьте 20 г (3 мерника) **Zeta 2 Sporex** на 980 мл воды и размешайте, чтобы способствовать растворению порошка. Подождите 60 минут - время, необходимое для активации раствора.

Погрузите инструменты в раствор на 30 минут для дезинфекции или на 60 минут для стерилизации.

Раствор средства для дезинфекции либо для стерилизации медицинских изделий соответственно можно использовать многократно в течение рабочей смены, если его внешний вид не изменился.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОЙ УПАКОВКИ ZETA 2 SPOREX ПОЛУЧАЕТСЯ 45 ЛИТРОВ СТЕРИЛИЗУЮЩЕГО РАСТВОРА

Спектр действия

Бактерицидное
Противодрожжевое
Туберкулоцидное
Вирулицидное
Спорицидное



поверхности



Zeta 3 Foam



поверхности

Готовое к применению безальдегидное дезинфицирующее и моющее средство с широким спектром биоцидного воздействия. Благодаря совместимости с материалами Zeta 3 Foam особенно рекомендуется для дезинфекции деликатных поверхностей медицинского инструмента (ручек, плевательниц, установок и т.п.) в перерывах между пациентами.

Действующие вещества: Четвертичные аммониевые соединения 5-го поколения

АРОМАТ ЛИМОНА



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ▶ Высокий уровень защиты: оказывает бактерицидное, фунгицидное и вирулицидное действие
- ▶ Подтверждённая совместимость с поверхностями, включая самые деликатные
- ▶ Практичность в использовании: пена способствует хорошему распределению активных веществ на дезинфицируемых поверхностях
- ▶ Безопасность для пользователя: не содержит альдегиды и фенолы

Способ применения

Разбрьзгайте **Zeta 3 Foam** и равномерно распределите по всем дезинфицируемым поверхностям и объектам (4 распыления Zeta 3 Foam позволяют покрыть поверхность площадью 0,25 м²). Дайте веществу воздействовать, после чего сотрите дезинфицирующую эмульсию салфеткой и оставьте поверхность высыхать.

В качестве альтернативы можно вприснуть **Zeta 3 Foam** на салфетку и протереть ею дезинфицируемые поверхности и объекты. Рекомендуется соблюдать время, указанное в таблице. Более длительное воздействие может привести к долговременному ухудшению состояния обработанных поверхностей.

Спектр действия

Бактерицидное
Фунгицидное
Вирулицидное



специальное применение



Zeta 5 Power Act



специальное применение

Специальное концентрированное дезинфицирующее и чистящее средство для аспирационных систем и пневматичек.

Действующие вещества: Триамин и ЧАС

РАСТВОР 1% ДЛЯ ПОЛНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ▶ Высокий уровень защиты: оказывает бактерицидное, фунгицидное, туберкулоцидное и вирулицидное действие
- ▶ Формула, позволяющая проводить быструю дезинфекцию (без туберкулоцидного действия) за 15 минут
- ▶ Подтверждённая совместимость с компонентами аспирационных систем.
- ▶ Не образует пены и не оказывает агрессивного воздействия на трубы аспирационных систем
- ▶ Лёгкость использования: короткое время действия и упрощённое дозирование благодаря дозатору, встроенному во флакон

Способ применения

Раствор 1 %: отмерьте 10 мл **Zeta 5 Power Act** на каждый литр воды и размешайте полученный раствор. Приготовьте примерно один литр раствора для каждой стоматологической установки. Втяните аспиратором приготовленный раствор. Дайте подействовать 15 минут для проведения быстрой дезинфекции (без туберкулоцидного действия) или оставьте на 4 часа для полного спектра действия. Пневматичеки заливают рабочим раствором средства и оставляют на время указанной дезинфекционной выдержки.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОГО ЛИТРА ZETA 5 POWER ACT ПОЛУЧАЕТСЯ 100 ЛИТРОВ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА

Спектр действия

Бактерицидное
Туберкулоцидное
Вирулицидное
Фунгицидное



Артикулы продуктов



Средства для дезинфекции и стерилизации хирургических, стоматологических, в том числе вращающихся, инструментов

Артикул	Продукт	Упаковка
C810000	Zeta 1 Ultra	Флакон 1 л
C810012	Zeta 2 Enzyme	Банка 1200 г с мерной ложечкой
C810011	Zeta 2 Sporex	Банка 900 г с мерной ложечкой


Дезинфицирующее и чистящее средство для обработки поверхностей медицинских изделий

Артикул	Продукт	Упаковка
C810025	Zeta 3 Foam	Флакон 750 мл с дозатором пены
C810026	Zeta 3 Foam	Канистра 3 л с дозатором

Средство для специального применения

Дезинфицирующее, очищающее и дезодорирующее средство для аспирационных систем и плевательниц

Артикул	Продукт	Упаковка
C810040	Zeta 5 Power Act	Флакон 1 л

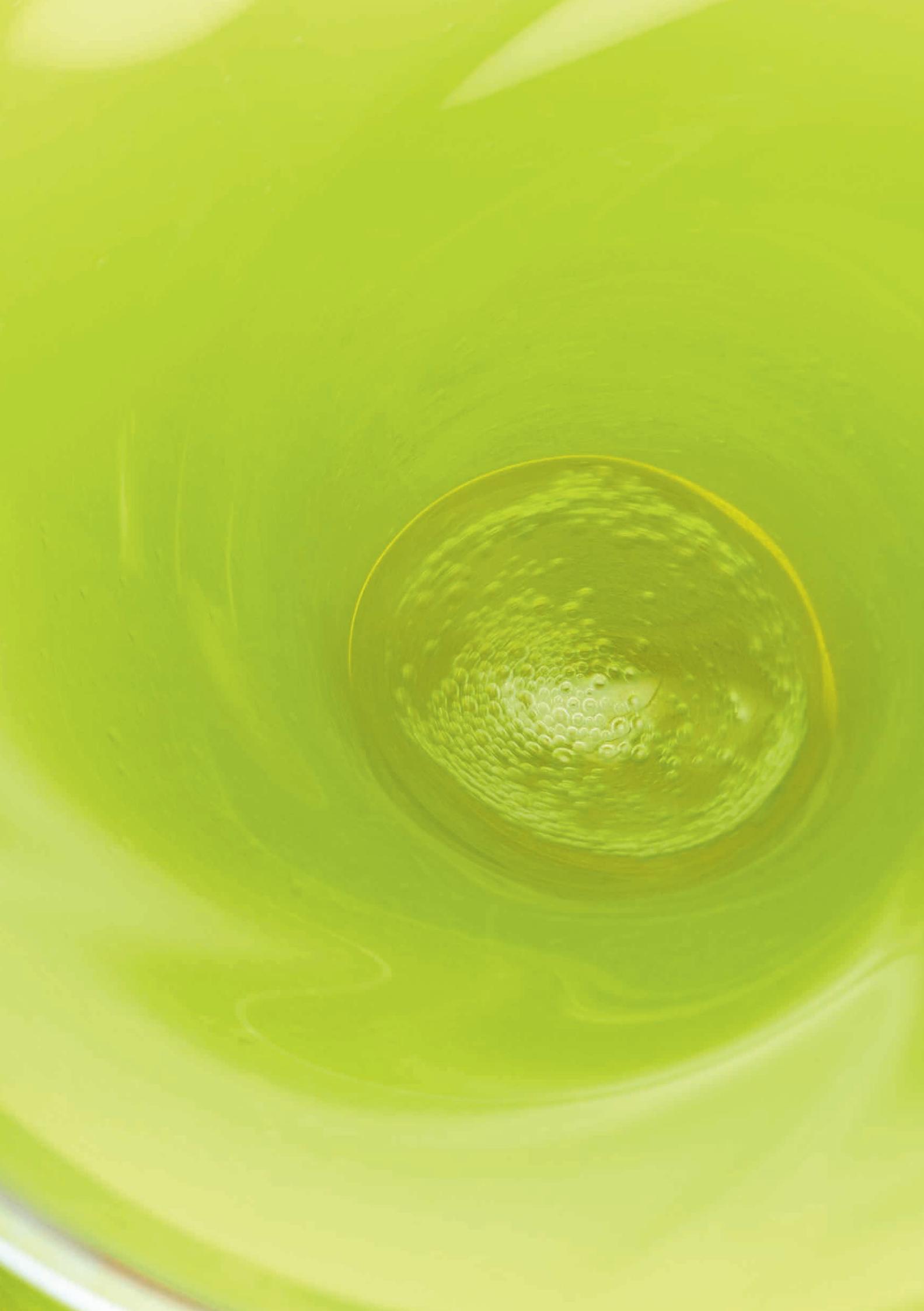

Fulfilling your needs