

# sympress




## As easy as pressing a button

**Sympress** est le **mélangeur automatique** spécialement conçu pour le mélange **rapide** et **facile** de **matériaux à empreinte sous forme de cartouches 5:1**.

Le mélange automatique facilite votre travail au quotidien.

POLYVALENT, FIABLE ET FACILE À UTILISER.

**Zhermack**   
Dental

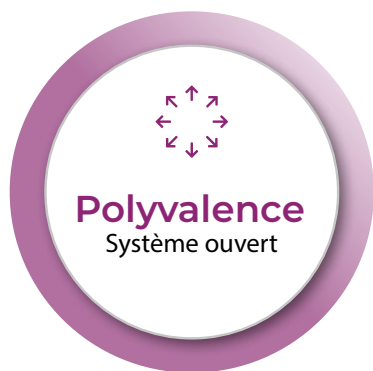

**Polyvalence**  
Système ouvert



**Fiabilité**  
Se fier à la qualité



**Facilité  
d'utilisation**  
Travailler  
intelligemment

- Compatible avec la plupart des matériaux à empreinte utilisés sur le marché (VPS et polyéther)
- Utilisable avec des cartouches dures et souples (360 ou 380 ml)
- La qualité allemande à laquelle vous faites confiance\*
- Fonctionnel : un design compact qui empiète peu sur votre plan de travail
- Faible niveau sonore
- Facile à utiliser pour offrir de la flexibilité et du confort aux cliniques dentaires
- Un processus plus rapide pour plus d'efficacité
- Mélange reproductible de façon constante qui réduit les risques liés au mélange manuel

## Essayez Sympress avec nos systèmes 5:1

### INDICATEUR DE NIVEAU DE REMPLISSAGE

qui montre la quantité de matériau dans la cartouche

### PANNEAU DE COMMANDE À LED

indiquant si l'appareil est prêt

### DEUX VITESSES DE DISTRIBUTION

rapide pour le remplissage d'une porte d'empreinte et plus lent pour le remplissage d'une seringue



### CHARGEMENT AUTOMATIQUE

pour une configuration simple

### COUVERCLE TRANSPARENT FAÇONNÉ

pour introduire facilement différents types de cartouche

### PETITE BASE



### L'embout dynamique-statique

permet de réduire jusqu'à 22 % le gaspillage de matière par rapport aux embouts les plus courants sur le marché utilisés par les concurrents\*\*

Cartouches de 380 ml pour un mélange efficace et homogène.



\* Sympress est présenté en partenariat avec Renfert.

\*\* Données internes. Test de mesure du volume des embouts réalisé à l'aide d'eau distillée, effectué sur huit embouts de marques différentes, avec trois répétitions pour chacun. Les données sont disponibles sur demande à l'adresse [info@zhermack.com](mailto:info@zhermack.com)

### Caractéristiques techniques

| Code      | Modèle                           | Taille (H x l x L - mm) | Poids (kg) | Alimentation (V/Hz) | Puissance totale (W) |
|-----------|----------------------------------|-------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| 6000-0000 | Sympress – 230 V                 | 330x190x380             | 7          | 230 V ± 10% / 50 Hz | 170                  |
| 6000-1000 | Sympress – 120 V                 | 330x190x380             | 7          | 120 V ± 10% / 60 Hz | 170                  |
| 6000-2000 | Sympress 230 V prise Royaume-Uni | 330x190x380             | 7          | 230 V ± 10% / 50 Hz | 170                  |