

# sympress




## As easy as pressing a button

**Sympress** est un **mélangeur automatique** spécialement conçu pour le mélange **rapide** et **facile** de **matériaux à empreinte sous forme de cartouches 5:1**.

Le mélange automatique facilite votre travail au quotidien.

POLYVALENT, FIABLE ET FACILE À UTILISER.

**Zhermack**   
Dental

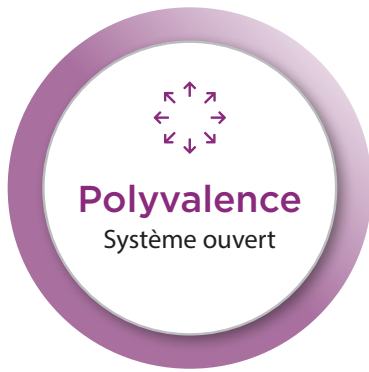

**Polyvalence**  
Système ouvert



**Fiabilité**  
Se fier à la qualité



**Facilité  
d'utilisation**  
Travailler  
intelligemment

- ▶ Compatible avec la plupart des matériaux à empreinte utilisés sur le marché (VPS et polyéther)
- ▶ Utilisable avec des cartouches dures et souples (360 ou 380 ml)
- ▶ La qualité allemande à laquelle vous faites confiance\*
- ▶ Fonctionnel : un design compact qui empiète peu sur votre plan de travail
- ▶ Faible niveau sonore
- ▶ Facile à utiliser pour offrir le maximum de flexibilité et de confort aux cliniques dentaires
- ▶ Un processus plus rapide pour plus d'efficacité
- ▶ Mélange de façon uniforme et offre un produit d'une meilleure qualité qu'avec le mélange manuel

## Essayez Sympress avec nos systèmes 5:1

### INDICATEUR DE NIVEAU DE REMPLISSAGE

qui montre la quantité de matériau dans la cartouche

### PANNEAU DE COMMANDE À LED

indiquant si l'appareil est prêt

### DEUX VITESSES DE DISTRIBUTION

rapide pour le remplissage d'une porte d'empreinte et plus lent pour le remplissage d'une seringue



### CHARGEMENT AUTOMATIQUE

pour une configuration simple

### COUVERCLE TRANSPARENT FAÇONNÉ

pour introduire facilement différents types de cartouche

### PETITE BASE

offrant la possibilité d'un montage au mur

Cartouches de 380 ml pour un mélange efficace et homogène.



### Embout breveté

Réduction de 18 % des pertes de matériau par rapport aux embouts classiques.\*\*

\* Sympress est présenté en partenariat avec Renfert. \*\* Tests internes de Zhermack.

### Caractéristiques techniques

| Code      | Modèle                           | Taille (H x l x L - mm) | Poids (kg) | Alimentation (V/Hz)      | Puissance totale (W) |
|-----------|----------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|----------------------|
| 6000-0000 | Sympress - 230 V                 | 330x190x380             | 7          | 230 V ± 10% / 50 Hz      | 170                  |
| 6000-1000 | Sympress - 120 V                 | 330x190x380             | 7          | 120 V ± 10% / 60 Hz      | 170                  |
| 6000-2000 | Sympress 230 V prise Royaume-Uni | 330x190x380             | 7          | 230 V ± 10% / 50 Hz      | 170                  |
| 6000-3000 | Sympress 100 V                   | 330x190x380             | 7          | 100 V ± 10% / 50 - 60 Hz | 170                  |

### Accessoires

| Code      | Description           |
|-----------|-----------------------|
| 6000-0100 | Kit de montage au mur |