


CAD
occlufast

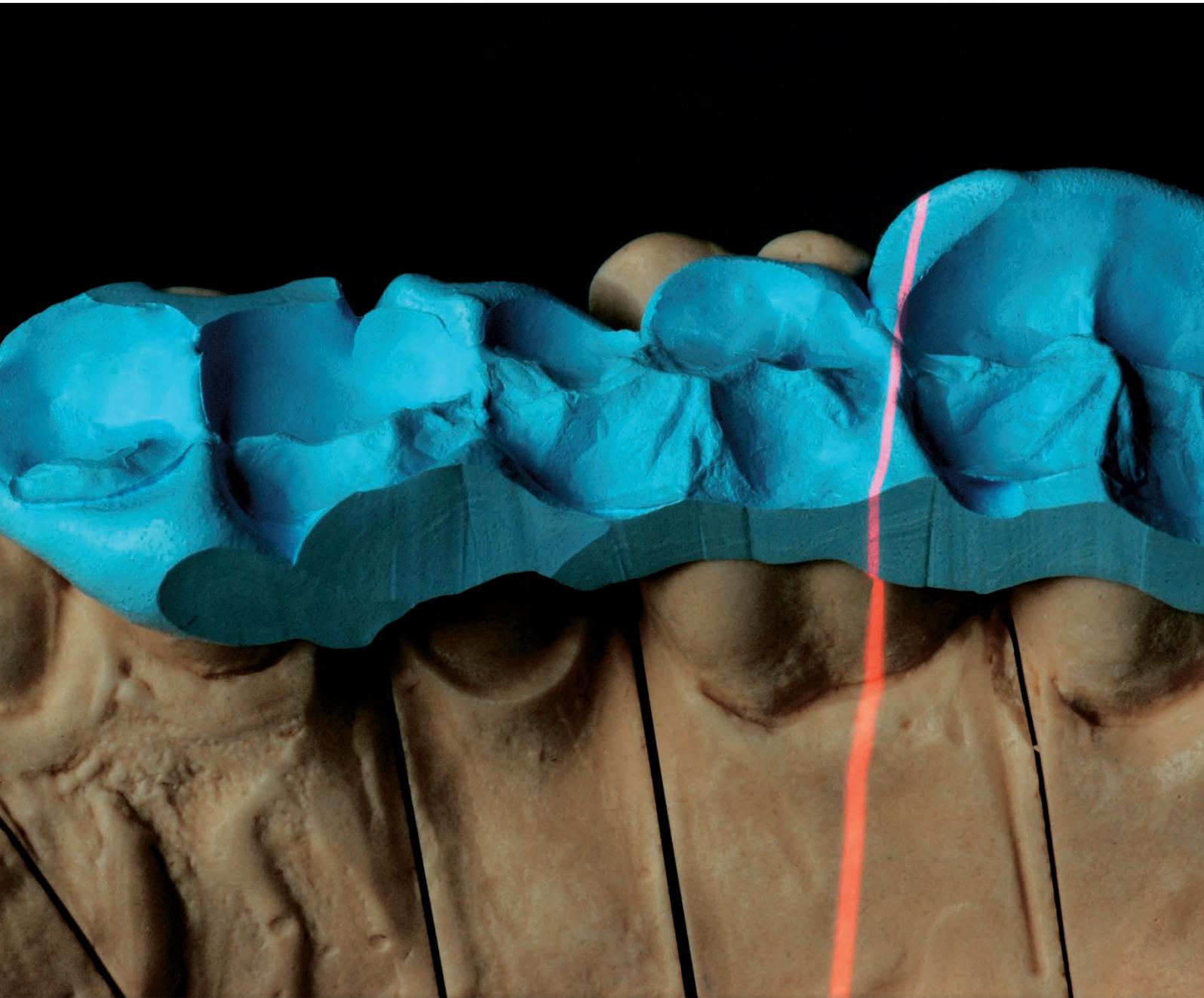

Clinical
Bite Registration CAD CAM

Zhermack 
Dental

occlufast CAD

Innovador, rápido y
extremadamente versátil

OCCLUFAST CAD es la nueva silicona-A en cartucho de 50 ml con sistema de automezclado para registros de mordida directos e indirectos. Gracias a su **fórmula avanzada optimiza la lectura** con los actuales sistemas de adquisición de imágenes CAD CAM.

LECTURA UNIVERSAL


OCCLUFAST CAD se ha estudiado para ser utilizado **con cualquier sistema de lectura láser, óptico y por contacto**. Las superficies de los registros obtenidos proporcionan el reflejo necesario para lograr una mejor lectura óptica y no absorben el haz de luz de los sistemas láser. **OCCLUFAST CAD** no requiere la aplicación de dióxido de titanio.

REPRODUCCIÓN FIEL

Con **OCCLUFAST CAD** se obtienen lecturas **sin alteraciones** derivadas de la absorción o de la refracción de la luz por lo que el software genera **imágenes precisas**.



Lectura intrabucal

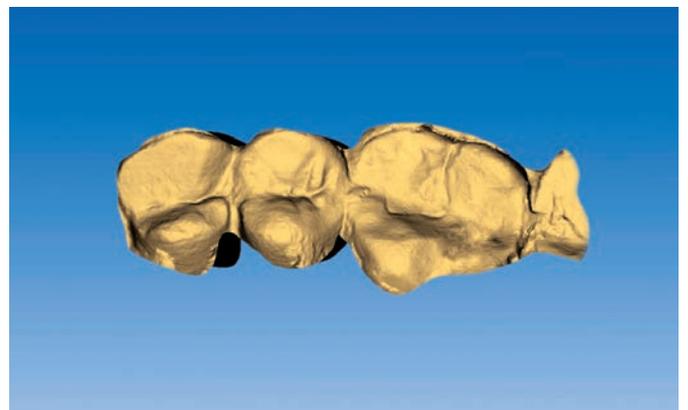


Reproducción digital

TIEMPO DE POLIMERIZACIÓN RÁPIDO


El tiempo de permanencia en la cavidad bucal de **OCCLUFAST CAD** (60'') permite realizar **registros de mordida precisos y sin riesgo de deformaciones**, garantizando el **máximo confort** al paciente y un considerable **ahorro de tiempo** para el profesional.

DUREZA ÓPTIMA

La **óptima dureza** de **OCCLUFAST CAD** (95 Shore A / 32 Shore D) permite el acabado con fresas o instrumentos cortantes y **facilita el reposicionamiento** del registro en las arcadas dentales.

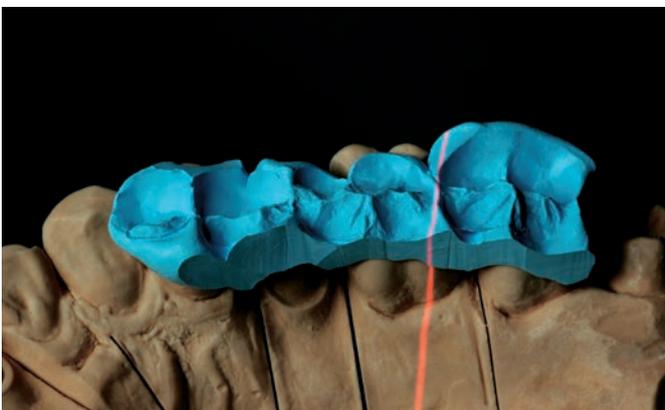

Lectura láser sobre modelo

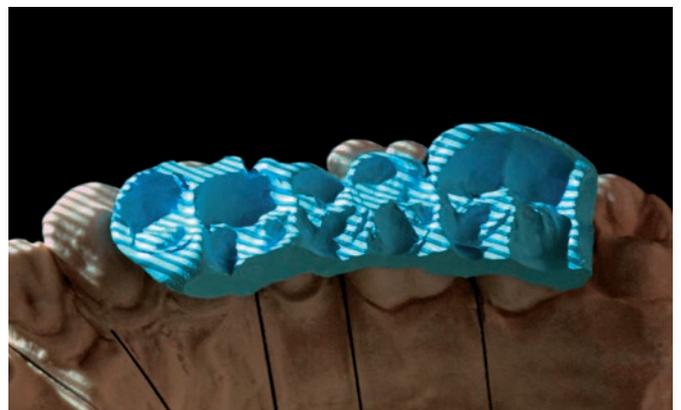

Lectura óptica sobre modelo



Confecciones

C200800 OCCLUFAST CAD 2 cartuchos (Base+Catalizador) de 50 ml + 12 puntas mezcladoras verdes

Accesorios

C202080 MIXING TIPS STANDARD Puntas mezcladoras verdes (48 pz)

C202095 BITE TIPS Puntas intraorales (48 pz)

C202100 DISPENSER D2 Dispensador D2 - 1:1

BRANCHES

GERMANY

Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND

Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
+48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA

Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com